




UpDate!
1896 **SCHWERT**
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

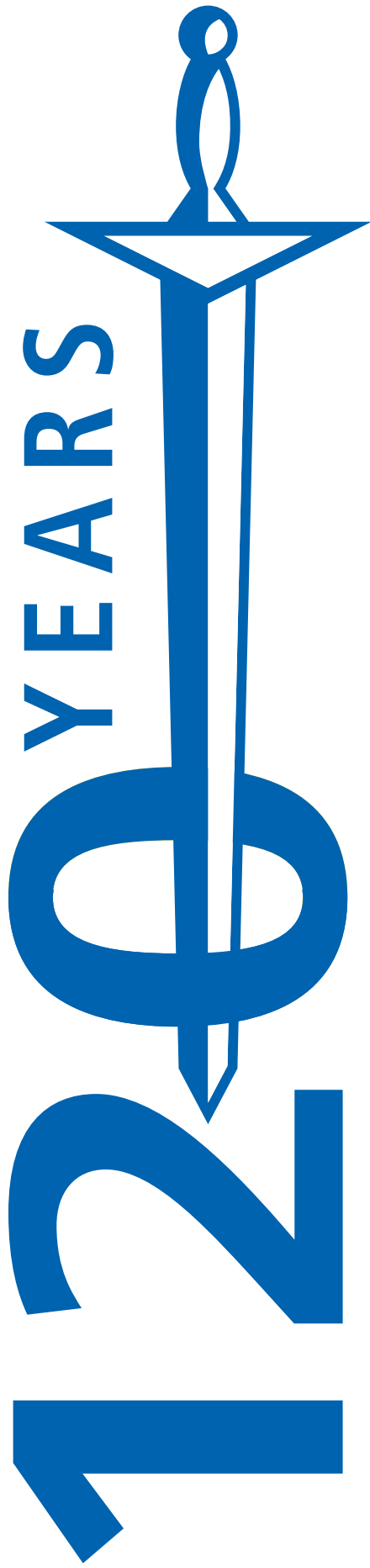

Chirurgie · Surgery

Skalpellklingen / Skalpellgriffe · Scalpel blades / Scalpel handles

UpDate!

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

SAFE-EX
DBGM

1033-60

Sicherheits-
klingenhalter,
ergonomische Form,
zerlegbar
Safety blade holder,
ergonomic shape,
dismountable

SAFE-EX · SAFE-EX



Das alltägliche Verletzungsrisiko beim Aufnehmen und vor allem dem Entfernen der Klinge vom Skalpell Griff ist mit herkömmlichen Instrumenten unvermeidlich. Mit dem neuen SCHWERT SAFE-EX hat man eine Innovation geschaffen die den Praxisalltag verändert. Die im Griff integrierte Funktion, ähnlich der Benutzung eines Kugelschreibers, reduziert die Verletzungsgefahr auf ein Minimum. Die Klinge wird beim SAFE-EX per Knopfdruck am distalen Ende einfach ausgeworfen. Praxispersonal wird im Zuge der Wiederaufbereitung wirksam vor Krankheitsübertragungen und Infektionen durch Schnitte geschützt.

The daily risk of injuries by mounting and especially dismounting of blades is not avoidable by standard blade holders. With the new SCHWERT SAFE-EX an innovation was developed that changes the daily routine eminently. The integrated function that works like a regular ball pen reduces the risk of an injury to a minimum. The blade is ejected from the SAFE-EX just by pushing the button on the distal end. The practice staff, especially during the re-processing, is safe from infections caused by unintended cuts.

1033-50

Edelstahl,
ergonomische Form
Stainless steel,
ergonomic shape

Enthalten
im Mikroschirurgie Kit
1790-100 (Seite 48)
Contained in the
Microsurgery Kit
1790-100 (page 48)

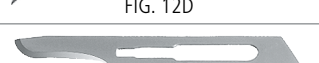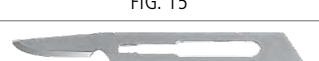	10 Stk., unsteril 10 pcs., non-sterile	100 Stk., unsteril 100 pcs., non-sterile	100 Stk., steril 100 pcs., sterile
 FIG. 10	1053-10	1053-110	1063-10*
 FIG. 11	1053-11	1053-111	1063-11*
 FIG. 12	1053-12	1053-112	1063-12*
 FIG. 12D	1053-12D	1053-112D	1063-12D*
 FIG. 15	1053-15	1053-115	1063-15*
 FIG. 15C	1053-15C	1053-115C	1063-15C*



1070-64*

FIG. 64, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**



1070-67*

FIG. 67, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**



1070-69*

FIG. 69, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**

1070-00

Mikro Skalpellklingengriff
ergonomisch, Titan
Micro scalpel blade holder
ergonomic, titanium

Weitere Skalpellklingen
Figuren auf Anfrage.
Further scalpel blades
figures per request.

Enthalten
im Mikrochirurgie Kit
1790-100 (Seite 48)
Contained in the
Microsurgery Kit
1790-100 (page 48)



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1135-17

MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
mikroverzahnt,
gebogen
micro serrated,
curved



1136-17

MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
gebogen
curved

fein
fine



1137-17

MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
gebogen
curved

sehr fein
very fine

Enthalten
im Mikrochirurgie Kit
1790-100 (Seite 48)
Contained in the
Microsurgery Kit
1790-100 (page 48)





Chirurgie · Surgery

UpDate!

Mikro Pinzetten · Micro forceps



1208-300

1x2 Zähne
1x2 teeth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate



1208-320

glatt
smooth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate



1208-340

COOLEY
17,5 cm

mikroverzahnt, atraumatisch
micro serrated, atraumatic



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA



1208-305

1x2 Zähne
1x2 teeth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate



Atraumatische
Instrumentenspitzen.
Atraumatic
instruments tips.

1208-345

COOLEY
17,5 cm

mikroverzahnt, atraumatisch
micro serrated, atraumatic



1208-355

Ø Ring: 2,0 mm
Ø ring: 2,0 mm
17,5 cm


Mikro Nahtpinzette
Micro suture forceps



Chirurgie · Surgery

UpDate!

Raspatorien · Periosteals

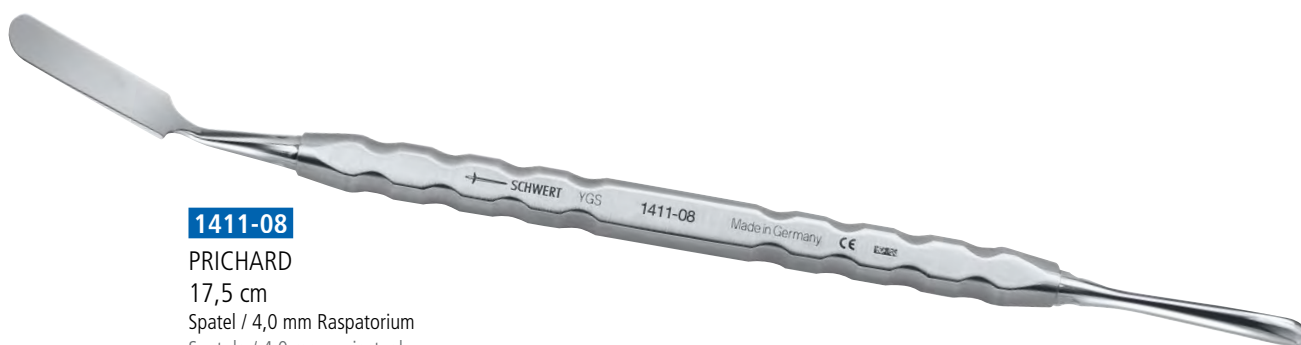

1411-08

PRICHARD

17,5 cm

Spatel / 4,0 mm Raspatorium

Spatula / 4.0 mm periosteal

auswechselbar

exchangeable



1411-02

Dissektion / Raspatorium, 1,8 / 3,4 mm, 17,5 cm, auswechselbar

Dissection / periosteal, 1.8 / 3.4 mm, 17.5 cm, exchangeable



1411-01

MOLT 2,5 / 4,0 mm, 17,5 cm

Enthalten
im Mikrochirurgie Kit
1790-100 (Seite 48)
Contained in the
Microsurgery Kit
1790-100 (page 48)



1411-07


2,6 / 2,6 mm 17,5 cm, fein

2.6 / 2.6 mm 17.5 cm, fine



1411-04

MICRO-BUSER 2,4 / 2,8 mm, 17,5 cm

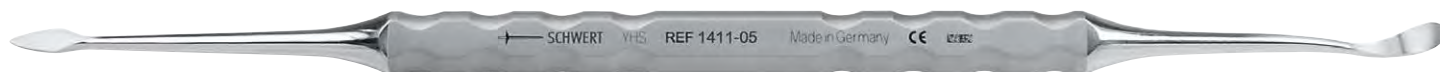

1411-05


BUSER 3,8 / 4,2 mm, 17,5 cm



1411-06

BUSER, 3,8 / 4,2 mm, 17,5 cm, gebogen

BUSER, 3.8 / 4.2 mm, 17.5 cm, curved

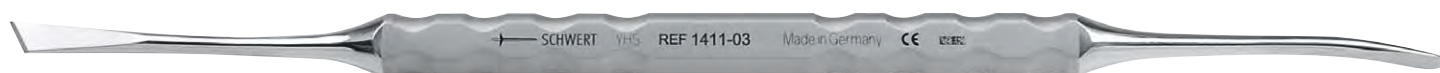

1411-03

GLICKMANN FIG. 24G, 4,0 / 4,0 mm, 17,5 cm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

SCHWERT **twist** Serie SCHWERT **twist** series

Die SCHWERT **twist** Instrumente mit gedrehtem Schluss vermeiden zuverlässig ein Verfangen des Fadens während des Knüpfens.

The SCHWERT **twist** instruments with the twisted lock avoid reliably sticking of the suture while knotting.



2000-10

twist TC

Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17,5 cm

5/0 - 8/0



2000-16

twist TC

Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17,5 cm

5/0 - 8/0



2000-60

twist TC

Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17,5 cm

Enthalten
im Mikroschirurgie Kit
1790-100 (Seite 48)
Contained in the
Microsurgery Kit
1790-100 (page 48)

2000-66

twist TC

Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17,5 cm

4/0 - 8/0



i

Tunnelierinstrumente · Tunneling instruments

In der Parodontologie finden die Tunnelierinstrumente Einsatz zur Präparation von Spalt- und Vollflappen, für spätere Kammaufbauten oder zur Deckung von Rezessionen mit Bindegewebe-Transplantat.

Die SCHWERT Tunnelierinstrumente erlauben eine minimalinvasive unterminierende Präparation, um große Aufklappungen zu vermeiden.

Instruments for the tunneling technique facilitates access and allowing a secure and atraumatic mucosal flap preparation.

The SCHWERT Tunneling instruments allow minimally invasive preparation to avoid big soft tissue flaps.




1705-2 Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, exchangeable




1705-3 Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, exchangeable



1705-4 Mucoperiostalelevator
Micro flap elevator

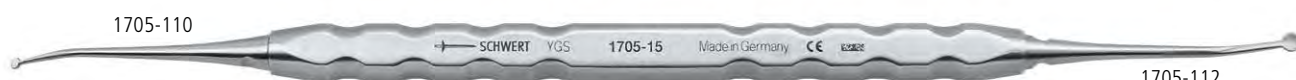

1705-15 Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar
Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable

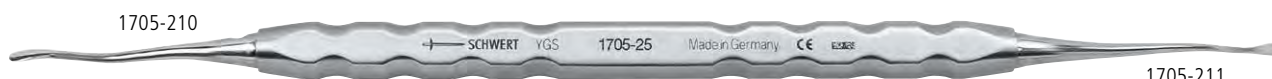


1705-25 Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, 18,0 cm, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, 18.0 cm, exchangeable



1705-35 Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, 18,0 cm, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, 18.0 cm, exchangeable



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

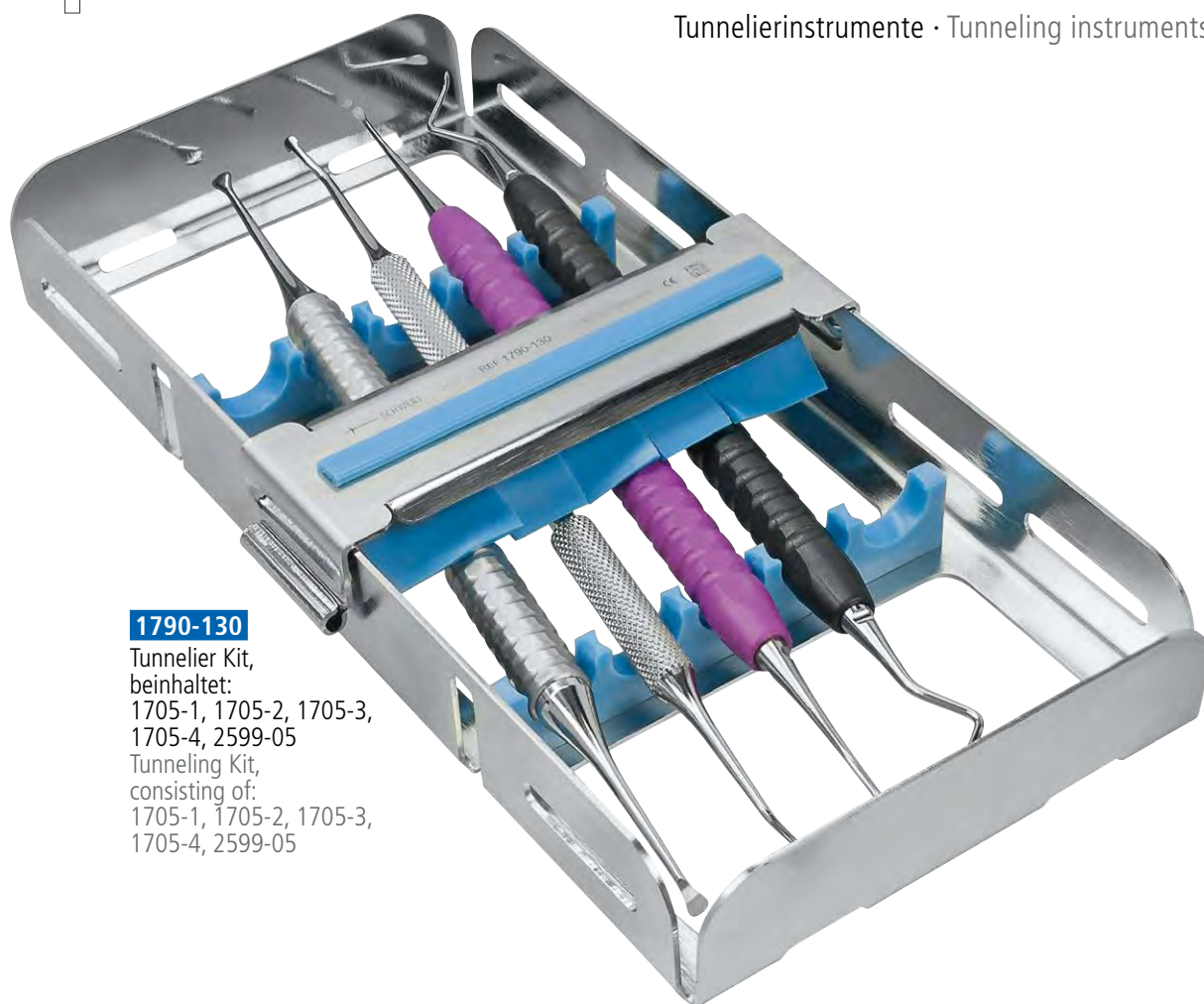

1790-130

Tunnelier Kit,
beinhaltet:
1705-1, 1705-2, 1705-3,
1705-4, 2599-05
Tunneling Kit,
consisting of:
1705-1, 1705-2, 1705-3,
1705-4, 2599-05



1705-55

Orbanmesser modifiziert für die Tunnelier-Technik
Orban knife, modified for tunneling technique

Spezielle Biegungen der Arbeitsenden und die feine Pfeilspitze ermöglichen eine einfache Tunnelpräparation an den schwer zugänglichen Seitenzahnbereichen.
Special bendings of the working tips and the fine arrow tip allow an easy tunnel preparation at the posterior region which are usually difficult to access.



1705-65

Parodontal Messer KGF8 modifiziert für die Tunnel-Technik
Periodontal knife KGF8 modified for tunneling technique

Abgewinkelte und im vorderen Drittel, leicht gebogene Arbeitsenden erleichtern den Zugang und ermöglichen dadurch, ein ideales Tunnelierringes im Seitenzahnbereich.
Bent and in the first third, slightly curved working tips, facilitate the access and allow due to that an ideal tunneling result in the posterior region.



1705-75

Parodontal Messer Fig. 1 gerade / gebogen
Periodontal knife Fig. 1 straight / curved

Leicht gebogenes Arbeitsende für den ersten initialen Zugang im Frontzahnbereich. Mit der Lanzenförmigen Spitze kann dann weiter dissektiert werden.
Slightly curved working tip for the initial access in the front teeth area. With the lance-shaped tip it is then easy to perform the dissection.




i


Meißel · Chisels

Zur chirurgischen Kronenverlängerung, Knochenkonturierung und Knochengewinnung. Vor allem in Wurzelnähe sollte der Zahn nicht mit oszillierenden oder rotierenden Instrumenten in Berührung kommen, da dies zu Schäden im Wurzelzement oder im Dentin in Knochennähe führen kann. Gehärtete Schneiden, korrekter Schnittwinkel und präziser Schliff gewährleisten einen schnellen und möglichst schonenden Eingriff.

For surgical crown lengthening, bone shaping and bone removing. Especially near the root, the contact with oscillating or rotating instruments should be avoided. This may cause damage to the root cementum or the dentin. Special hardened blades, correct cutting edges and a precise finish ensure fast and gentle treatments.

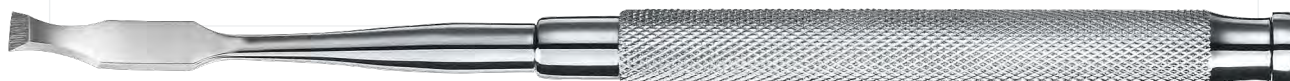

1650-1 OCHSENBEIN FIG. 1, 16,0 cm

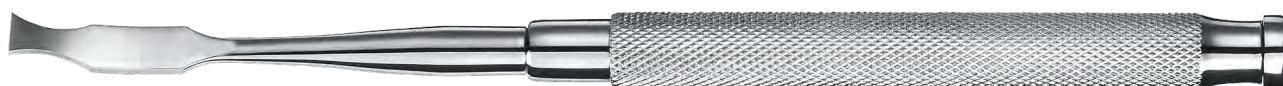

1650-2 OCHSENBEIN FIG. 2, 16,0 cm



1650-30 OCHSENBEIN FIG. 3



1650-40 OCHSENBEIN FIG. 4



1650-365 RHODES BACK ACTION FIG. 36/37



1651-1 FEDI FIG. 1




1651-2 FEDI FIG. 2



1650-15 WEDELSTAEDT FIG. 5/6



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

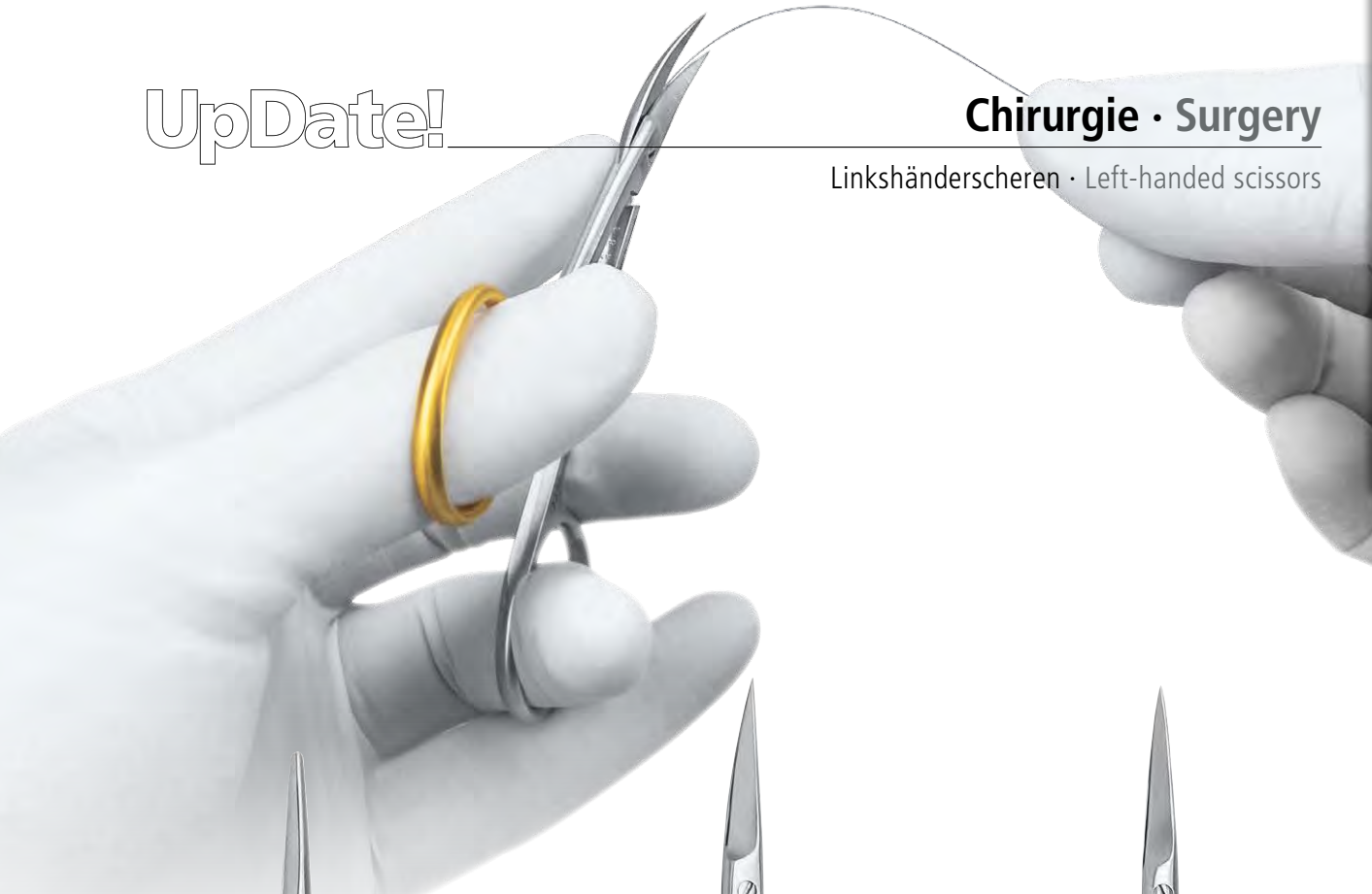


1139-11L

METZENBAUM
10,5 cm
Präparierschere, gerade
undermining /
dissecting scissors, straight



1111-400L

IRIS 
11,5 cm
gebogen
curved

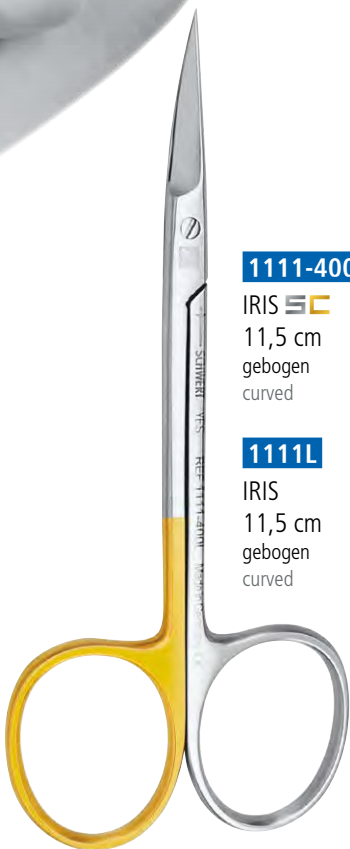

1111L

IRIS
11,5 cm
gebogen
curved



1110L

IRIS
11,5 cm
gerade
straight



Linkshänderscheren • Left-handed scissors

Die meisten der 10-20 Prozent Linkshänder in der Bevölkerung kennen das Problem mit Standardscheren, die für Rechtshänder entworfen sind. Scheren werden täglich sehr oft in der Praxis für die verschiedensten Anwendungen benötigt. Für Linkshänder ist bei „normalen“ Scheren vor allem die Schnittkante schlecht zu sehen. Eine präzise Schnittführung ist damit nur sehr erschwert, oder überhaupt nicht möglich. Hier bieten die speziellen Scheren von SCHWERT eine deutliche Erleichterung im Praxisalltag.

Most of the 10-20 percent part of left handed know about their problems with standard surgical scissors. Scissors are used very often during the day in your practice. For left handed it is quite difficult to see the cutting edge of "regular" scissors. Therefore a precise cut is almost impossible. The new left handed SCHWERT scissors will improve your daily work a lot.



i

ULTRA Scheren · ULTRA Scissors

In der Praxis sind perfekt funktionierende Instrumente gefordert um Zeit zu sparen und noch präzisere Eingriffe zu ermöglichen. Die neuen schwarz beschichteten SCHWERT ULTRA Scheren vereinigen dabei die Vorteile bekannter SuperCut Scheren mit einer extrem harten und widerstandsfähigen Oberfläche:

- Extrem harte und glatte Oberfläche für präzisen Gang und geringen Verschleiß
- SuperCut Schliff für rasiermesserscharfes Schneiden und weniger Trauma. Ein Scherblatt mikroverzahnt damit Faden oder Weichgewebe nicht abrutschen
- Die blendarme schwarze Beschichtung verbessert die Sicht und bietet hervorragenden Kontrast im ausgeleuchteten Mundraum für noch präzisere Eingriffe
- Besonders beständig gegen Chemikalien in der Wiederaufbereitung
- Als „La Grange“ Figur erhältlich › Anatomische S-Form für guten Zugang in allen Quadranten

In today's practice perfectly functioning instruments are required to save time and still allow more precise treatments. The new black coated SCHWERT ULTRA Scissors combine the advantages of known SuperCut with an extremely hard and durable surface:

- Extremely hard and smooth coating for a precise feeling and less wear
- SuperCut finish for razor sharp cutting and less trauma. One blade micro serrated so that thread or soft tissue will not slip off
- The low-glare black coating improves visibility and provides excellent contrast to the gingiva. For even more precise surgical interventions
- Highly resistant to chemicals and thus excellently clean and sterilizable
- Available as "La Grange" figure › Anatomical S-shape for easy access in all mouth areas



UpDate!

Chirurgie • Surgery

ULTRA Scheren • ULTRA Scissors

ULTRA SCHEREN
SCISSORS



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA



1117-400B

GOLDMANN-FOX ULTRA
13,0 cm
gebogen
curved

1117-400

GOLDMANN-FOX SC
13,0 cm
gebogen
curved



1125-400B

JOSEPH ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved

1125-400

JOSEPH SC
14,0 cm
gebogen
curved



1139-400B

METZENBAUM
ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

SCHAEFER Wundhaken / Wangenhalter SCHAEFER wound / cheek retractor

Kombinierter Wundhaken und Wangenhalter SCHAEFER

Doppelt funktionelles Instrument zum Abhalten des Lappens und der Wange bei chirurgischen Eingriffen wie Implantation und Wurzelspitzenresektion.

Combined wound and cheek retractor SCHAEFER

Dual-purpose instrument for the retraction of flaps and cheek during surgery such as implantation and apicectomy.



2513

MATY
17,0 cm

2514

MATY
16,0 cm
Kinder
children

i

MATY Abhalter · retractor

- Patientenfreundlich
- universell für OK und UK
- kein Herausnehmen bei Unterbrechung
- patient friendly
- universal maxilla / mandible
- no need to remove during interruptions



1935

SCHAEFER
23,0 cm



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA



2559-1

FRAZIER
Ø 2,0 mm
18,0 cm

2559-2

FRAZIER
Ø 3,0 mm
18,0 cm



2562-1

MATY
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 1,5 mm
Surgical aspirator with slot,
titanium tip, Ø 1.5 mm

2562-2

MATY
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 3,0 mm
Surgical aspirator with
slot, titanium tip,
Ø 3.0 mm

Anschluss
Ø 6,0 mm
Connection
Ø 6.0 mm

Anschluss
Ø 6,0 mm
Connection
Ø 6.0 mm

2564-15

Ø 1,5 mm

2564-30

Ø 3,0 mm

2564-50

Ø 5,0 mm

Chirurgischer Absauger, rostfrei mit Schlitz im
Arbeitsende um Festsaugen zu verhindern.
Surgical suction tube, stainless steel, with
slot at the working end in order to prevent
from adhering during suction.

i



Der **Kim Retraktor** eignet sich hervorragend für das Abhalten des Weichgewebs bei der 8er Extraktion. Durch seine schlanke Form lässt sich das Instrument ideal in allen Quadranten positionieren. Die 45° Biegung in Verbindung mit der Mikroverzahnung lässt ein patientenfreundliches Abhalten ohne Abgleiten am Knochen zu.

The **Kim retractor** is excellent suited for keeping away the soft tissue during wisdom teeth extractions. Due to its slim shape it is very easy to place the instrument in every area of the jaw. The 45° angle in combination with the micro serration allows a very patient friendly retracting without slipping away from the bone.

1933-1

KIM
10,5mm breit, flach,
45° gewinkelt
10.5mm width, flat,
45° angulated




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Extraktion · Extraction

P-LUX Periotom · P-LUX periotome

UpDate!

P-LUX
PERIOTOM

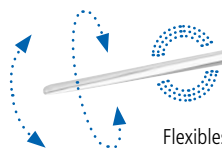

Flexibles Arbeitsende
Flexible working tip

617-20


P-LUX Periotom
P-LUX Periotome

i

P-LUX Periotom · P-LUX Periotome

Trennung der Scharpey'schen Fasern mit dem neuen SCHWERT P-LUX Periotom. Um eine möglichst atraumatische Zahnextraktion durchzuführen, ist es angebracht vor dem Einsatz eines Wurzelhebers oder einer Zahnzange die Scharpey'schen Fasern mittels eines Periotoms zu durchtrennen. Hierzu wird das Periotom vor der Extraktion durch den Sulcus gezogen. Die ordnungsgemäße Anwendung schont die umliegende Gingiva und das Periost. Das SCHWERT P-LUX Griffdesign garantiert dabei ein sicheres und taktiles Handling. **Besonders hervorzuheben ist dabei die außergewöhnlich hohe Stabilität der Klinge. Durch ihre Flexibilität passt sie sich optimal der Wurzelkontur an und gleichzeitig kann ein hoher Druck aufgebaut werden.**

Cutting of sharpey's fibres with the new SCHWERT P-LUX periotome. To accomplish an atraumatic extraction the Sharpey's fibres should be separated by using a periotome primary to the use of extraction forceps or elevators. Therefore the Periotome is driven thru the sulcus. The proper use prevents the surrounding gingiva and the periost. The SCHWERT P-LUX handle design secures a safe and tactile handling. The blade of this periotome has to be highlighted specially – **the blade is flexible and adapts perfectly to root structures, simultaneously due to its high stability it is possible to gain a certain pressure.** This is possible by choosing a special medical stainless steel and hardening treatment.

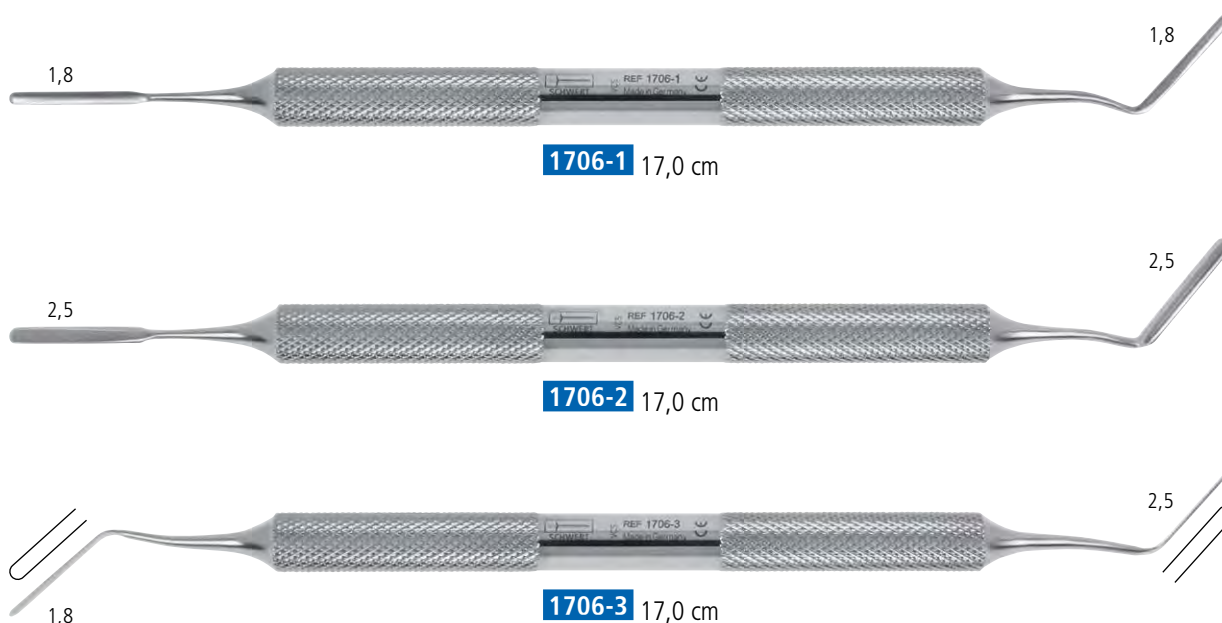



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

i

P-LUX • P-LUX

Die neuen **P-LUX** sind eine moderne, universelle und komplette Serie von Extraktionsinstrumenten in einem Tray. Das neue Griffdesign ist höchst ergonomisch, verhindert ein unbeabsichtigtes Abrutschen während des Gebrauchs und garantiert außerdem eine direkte und kontrollierte Kraftübertragung. Zahn- und Wurzelfrakturen werden verhindert. Alle Instrumente sind perfekt zur atraumatischen Zahnextraktion geeignet, ohne angrenzende Strukturen zu zerstören. Die Farbmarkierung erlaubt eine übersichtliche Anwendung.

The new **P-LUX** are the modern, universal and complete extraction instrument series in one tray. The new handle design is highly ergonomic and prevents unintended slipping during the usage. It also guarantees a direct and controlled power transmission to prevent from tooth and root fractures. All instruments are perfectly suited for a non-traumatic tooth extraction without injuring surrounding structures. The color coding ensures a fast and easy handling.

2599-10

Protector für bis zu 8 Instrumente,
180 x 136 x 27 mm
Protector for up to 8 instruments,
180 x 136 x 27 mm

617-100

P-LUX Set, beinhaltet:
**617-01, 617-03, 617-04,
617-06, 617-07, 617-20, 1371-1,
2599-10**
P-LUX set, consisting of:
**617-01, 617-03, 617-04,
617-06, 617-07, 617-20, 1371-1,
2599-10**

617-100S

P-LUX Set, beinhaltet:
**617-01, 617-03, 617-04,
617-06, 617-07, 617-20,
1372-11, 2599-10**
P-LUX set, consisting of:
**617-01, 617-03, 617-04, 617-06,
617-07, 617-20, 1372-11, 2599-10**



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Extraktion · Extraction

P-LUX Elevatoren · P-LUX elevators

UpDate!

i

P-LUX Anwendung · P-LUX application



1. Initiales Lösen der Desmodontalfasern mit dem P-LUX Desmotom. Arbeitsposition Bleistiftgriff.

1. Initial loosening of the desmodontal fibres with the P-LUX desmotome. Working position pencil handle.



2. Progressive Luxation mit den P-LUX Instrumenten (von schmal, zu breit). Ideale Positionen: Approximal (mesial oder distal) zum zu extrahierenden Zahn.

2. Progressive luxation with the P-LUX instruments (first narrow then wide). Best positions: Approximal (mesial or distal) to the tooth to be extracted!




3. Komplette Luxation unter Verwendung eines breiten P-LUX Instruments. Schonende Extraktion ohne Wurzelfraktur!

3. Complete luxation with support of a wide P-LUX instrument. Gentle extraction without root fractures!




4. Inspektion der leeren Zahnalveole. **Wichtig: Komplett Entfernung aller entzündlichen und konvektiven Gewebestrukturen.**

4. Inspection of the empty tooth socket. **Important: Complete removal of all inflammable and connective tissue structures.**

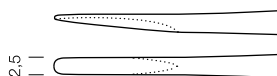

617-01 P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw

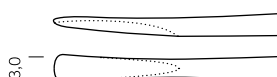

617-02 P-LUX FIG. 2, 3,0 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 2, 3.0 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-03 P-LUX FIG. 3, 4,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 3, 4.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-04 P-LUX FIG. 4, 2,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 4, 2.5 mm, curved, blue, for lower jaw


P-LUX




SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA




617-05 P-LUX FIG. 5, 3,0 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 5, 3.0 mm, curved, blue, for lower jaw

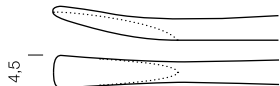

617-06 P-LUX FIG. 6, 4,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 6, 4.5 mm, curved, blue, for lower jaw

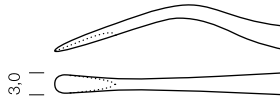

617-08 P-LUX FIG. 8, gebogen, rot, distal Wurzelheber
P-LUX FIG. 8, curved, red, distal elevator

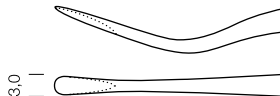

617-09 P-LUX FIG. 9, gebogen, rot, mesial Wurzelheber
P-LUX FIG. 9, curved, red, mesial elevator



617-10 P-LUX FIG. 10, gebogen, gelb, distal Wurzelheber
P-LUX FIG. 10, curved, yellow, distal elevator



617-11 P-LUX FIG. 11, gebogen, gelb, mesial Wurzelheber
P-LUX FIG. 11, curved, yellow, mesial elevator



Extraktion • Extraction

UpDate!


P-LUX Syndesmote • P-LUX desmotomes

P-LUX


SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA




617-07 P-LUX FIG. 7, Desmotom, gerade, gelb, zum initialen Lösen der Desmodontalfasern
P-LUX FIG. 7, desmotome, straight, yellow, for initial cutting of the desmodontal fibres

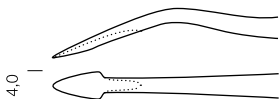


617-12 P-LUX FIG. 12, Desmotom gebogen, rot, für distalen Zugang
P-LUX FIG. 12, desmotome, curved, red, distal angulation

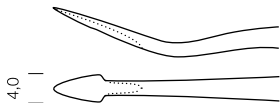

617-13 P-LUX FIG. 13, Desmotom gebogen, rot, für mesialen Zugang
P-LUX FIG. 13, desmotome, curved, red, mesial angulation

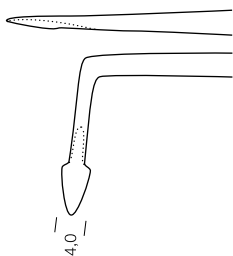

617-14 P-LUX FIG. 14, Desmotom linksgebogen, gelb, für linguales bzw. bukkales Luxieren
P-LUX FIG. 14, desmotome, left-bending, yellow, for lingual / buccal luxation

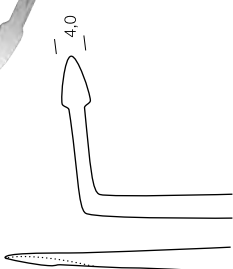

617-15 P-LUX FIG. 15, Desmotom rechtsgebogen, gelb, für linguales bzw. bukkales Luxieren
P-LUX FIG. 15, desmotome, right-bending, yellow, for lingual / buccal luxation



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

i

SCHWERT Design • LUCAS Küretten • LUCAS curettes

Die bewährten Lucas Küretten im SCHWERT Design Griff für ein optimales Handling. Die Größen 1,5 mm, 2,5 mm und 3,0 mm sind nun neben der Standardausführung auch mit gezahnten Arbeitsenden verfügbar. Die feine Zahnung ermöglicht dabei eine ideale Behandlung, im Bereich der Zystenentfernung und wirkt effektiv einem Wegrutschen, an der zu behandelnden Stelle entgegen.


The proven Lucas curettes in the SCHWERT design handle for a precise handling. The sizes 1.5mm, 2.5mm and 3.0mm are now beside the standard figures also available with serrated working tips. The fine serration allows an ideal treatment in the area of removing cysts and avoids effectively a slipping away from the spot which has to be treated.



1372-0 LUCAS Kürette, Ø 1,5 mm, ungezähnt
LUCAS curette, Ø 1.5 mm, non-serrated



1372-1 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, ungezähnt
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, non-serrated

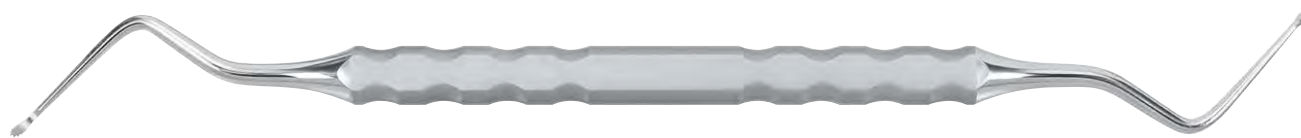

1372-2 LUCAS Kürette, Ø 3,0 mm, ungezähnt
LUCAS curette, Ø 3.0 mm, non-serrated



1372-10 LUCAS Kürette, Ø 1,5 mm, gezähnt
LUCAS curette, Ø 1.5 mm, serrated



1372-11 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, gezähnt
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, serrated



1372-12 LUCAS Kürette, Ø 3,0 mm, gezähnt
LUCAS curette, Ø 3.0 mm, serrated



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Extraktion • Extraction

Wurzelheber • Elevators

UpDate!

i

Modifizierter Heber nach BECK Modified Elevator BECK

Der modifizierte BECK Heber erlaubt eine optimierte interdentale Luxation. Herkömmliche Wurzelheber verfügen über einen runden Instrumentenrücken. Diese Geometrie bietet keine Abstützungspunkte am Nachbarzahn. Der SCHWERT Heber nach BECK besitzt auf der Instrumentenrückseite mehrere Flächen und keinen Radius. Hiermit wird die Anzahl der Abstützungspunkte auf 5 erhöht. Im Ergebnis verlängert sich die einwirkende Hebekraft während der Luxation um mehr als das Doppelte, was die Luxation deutlich verkürzt und optimiert.

The new modified BECK Elevator allows an optimized interdental luxation. Standard elevators have a round back surface at the working tip. But a radius doesn't give brace support. With the flattened geometry of the new SCHWERT BECK elevator the number of supporting points is increased to 5. As a result the lifting power is more than doubled during the luxation, it is easier and time saving.



1. Durch den feinen und flachen Ellipsenschliff an der Instrumentenspitze ist ein schonendes Eindringen in den Approximalraum gewährleistet. Die seitliche Verzahnung erzeugt zusätzlichen Grip am zu extrahierenden Zahn.

1. The elliptical and thin tip shape simplifies the approximal insertion. The serration generates additional grip on the extracted tooth.



2. Bedingt durch die Formgebung der Instrumentenspitze stehen 180° hebende Kraft am zu extrahierenden Zahn zur Verfügung (90° bei herkömmlichen Hebern). Die Extraktion wird so deutlich unterstützt.

2. Because of the tips shape 180° lifting power are available at the tooth to be extracted (Standard elevators are granting less than 90°). With the BECK elevator the extraction is performed much faster and easier.



3. It is not foreseen, to use the instrument as an axial lever, as shown on the picture or in any other way. Because of the special shape an over strengthening of the tip may cause breakage. We assume no liability for these damage.

3. Durch die spezielle Formgebung ist eine axial hebelnde Belastung der Instrumentenspitzen zu vermeiden, da dies zu Bruch führen kann. Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.



Back
Surface

615-1

BECK
2,8 mm



615-2

BECK
3,5 mm



615-3

BECK
4,0 mm





SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

i

Wurzelheber FIG. 77R • Root elevator FIG. 77R




Aufgrund der Biegung des Instrumentes ist ein sehr guter Zugang am Approximalkontakt zum 8er Zahn in allen Quadranten möglich. Die feine, gezahnte Spitze erlaubt ein schonendes Luxieren.

The angulation of the instrument secures an excellent access on the approximal contact to tooth no. 8 in all quadrants. The fine serrated tip allows a gentle luxation.



Die feine Maulrandzahnung stellt sicher, dass der Zahn beim Luxieren nicht vom Instrument abgleitet.

The fine serrated edges assure that the tooth will not slide from the instrument during luxation.

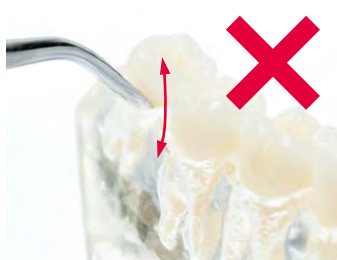

ACHTUNG! Es ist nicht vorgesehen, diese Instrumente hebelnd einzusetzen.

ATTENTION! Don't use the instrument as a lever.



ACHTUNG! Bitte vermeiden Sie die punktuelle Überbelastung des Instruments auf der absoluten Spitze. Dies kann zum Ausbrechen des Arbeitsendes führen.

ATTENTION! Please avoid any punctual overloading of the instrument on its absolute tip, as the working tip might break off.

Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

We cannot assume any liability for damages caused by improper use of the instruments.



614-30

Apical Wurzelheber Fig. #77R, hervorragend geeignet für 8er
Apical root elevator fig. #77R, perfectly suited for wisdom teeth



i

SCHWERT Zahnzangen • SCHWERT extraction forceps

- Präzise, anatomisch ausgeformte Arbeitsenden mit Haftprofil
- Ergonomisch grazile Form für optimale Taktilität und Kontrolle
- Teflonscheibe im Zangenschloss für langen gleichmäßigen Gang
- Temperaturresistent bis zu 250°C
- Anatomically precise shaped and serrated gripping jaws
- Ergonomically and slender shaped for superior tactility at good control
- Teflon disc inside the lock for a smooth handling
- temperature resistant up to 250°C

Nun auch vorsortiert in der praktischen 10er Box. Im Set enthalten sind die gängigsten Zangen Figuren um alle Zähne möglichst schonend zu extrahieren. Im Detail enthalten sind:

Now also available in the practicable box with 10 instruments. The set consists of the most common forceps pattern to extract all teeth as gentle as possible. The set consists in detail of:



152-100

SCHWERT
Zahnzangen
10er Box
SCHWERT
Extraction
forceps
10pcs box

152-2 FIG. 2 16,0 cm Anterior teeth	152-7 FIG. 7 16,0 cm Premolars	152-17 FIG. 17 16,0 cm Molars right	152-18 FIG. 18 16,0 cm Molars left	152-67A FIG. 67A 17,5 cm Molars / wisdom tooth
152-51A FIG. 51A 17,0 cm Roots	152-33 FIG. 33 14,5 cm Anterior, Premolars, Roots	152-13 FIG. 13 14,5 cm Anterior, Premolars	152-22 FIG. 22 14,0 cm Molars	152-79 FIG. 79 16,0 cm Molars / wisdom tooth



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


i

Bone Spreading Instrumente · Bone spreading instruments

Altbewährte Instrumente im neuen Kleid! Unsere bekannten Knochenspreizinstrumente wurden nun um eine Farbkodierung erweitert, welche die schnelle und einfache Bestimmung, der benötigten Instrumente ermöglicht.

Nach der Pilotbohrung, werden die Instrumente inseriert. Durch vorsichtige Drehbewegung wird die gewünschte Knochenspreizung erreicht, die Drehung wird dabei soweit fortgesetzt, bis das nächstgrößere Instrument eingeführt werden kann. Diese Schritte werden wiederholt, bis der geforderte Implantat durchmesser erreicht wurde.


Well tried instruments in a new look! Our well known bone spreading instruments were improved by a color coding for an easy and fast determination which instrument is necessary during the treatment. After the pilot drill is carried out, the instruments are going to be inserted. The wished bone spreading is achieved, by small turning movements of the instrument. The turning is sustained until it is possible to insert the next larger instrument. The steps are repeated, up to the required implant diameter is reached.

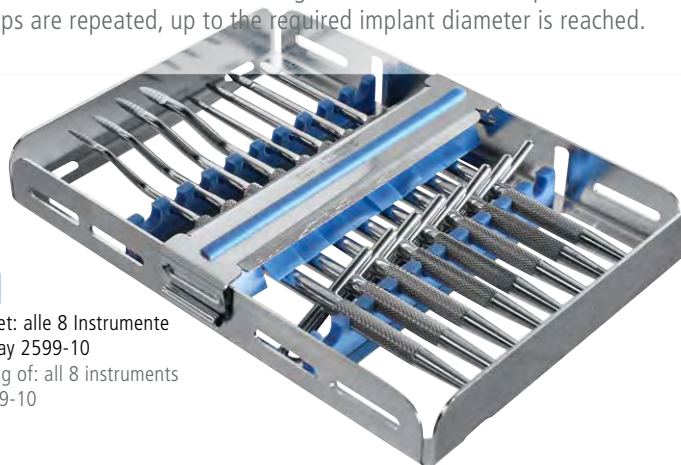

1710-00

Set, beinhaltet: alle 8 Instrumente
und Waschtray 2599-10

Set, consisting of: all 8 instruments
and tray 2599-10

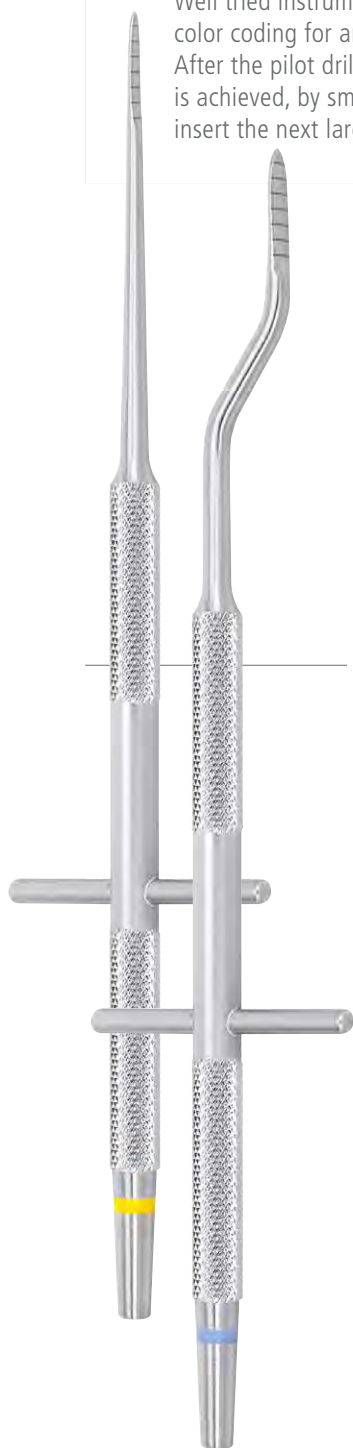

Art. Nr. Item-No.	Form der Instrumentenspitze Shape of the instrument tip	Ø außen Ø exterior	Graduierung graduation
1710-122	bajonett bayonet ●	2,2 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-128	bajonett bayonet ●	2,8 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-134	bajonett bayonet ●	3,4 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-140	bajonett bayonet ●	4,0 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-22	gerade straight ●	2,2 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-28	gerade straight ●	2,8 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-34	gerade straight ●	3,4 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14
1710-40	gerade straight ●	4,0 mm	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14



i


Knochenmahlzange · Bone mill forceps

Knochenmahlzange zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial.

- Titan-Mahlwerk austauschbar
- Mahlwerk vollständig zerlegbar
- Kein Materialverlust
- RKI-Richtlinien konform, da einfach zu reinigen
- Spezieller Zangenrohling, welcher paralleles Schließen des Mahlwerks gewährleistet
- Optimales Mahlergebnis
- Anschlagschraube verhindert direkten Kontakt der Mahlflächen, was die Lebensdauer des Mahlwerks erhöht

Bone mill forceps for the preparation of autologous bone material.

- Exchangeable titanium bone mill inserts
- Easy to clean
- No loss of bone material
- Conform to the RKI-guidelines
- Specially designed new forceps, which allows parallel closing of the milling parts
- Maximum milling result
- Stop screw avoids direct contact of the milling parts and protects from wear

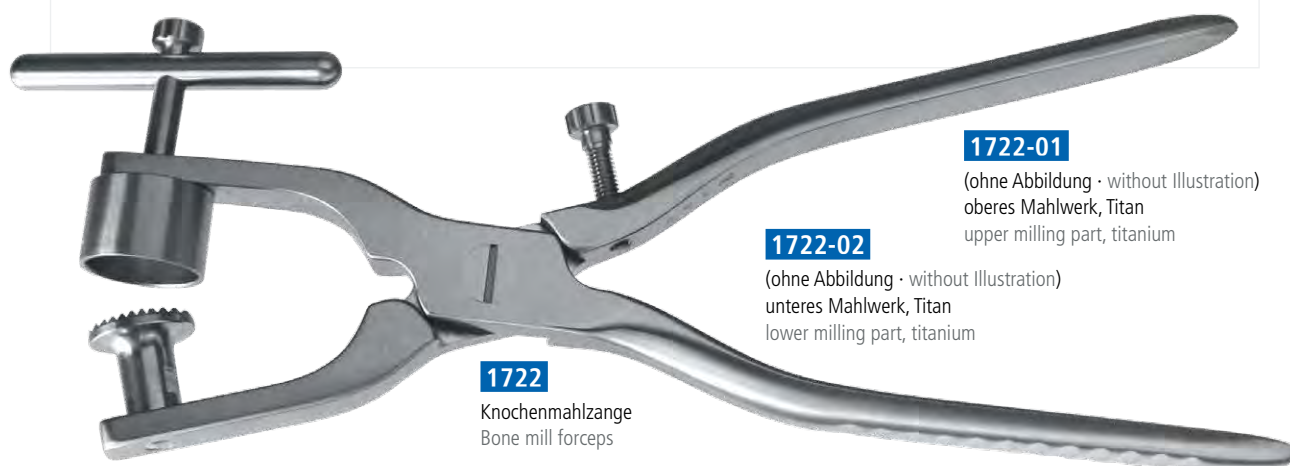

1722-01

(ohne Abbildung · without Illustration)
oberes Mahlwerk, Titan
upper milling part, titanium

1722-02

(ohne Abbildung · without Illustration)
unteres Mahlwerk, Titan
lower milling part, titanium

1722

Knochenmahlzange
Bone mill forceps

i

Knochenfalle · Bone trap

Knochenfalle / Saugkanüle mit Filter. Bereits während der Präparation des Implantatlagers kann die Knochenfalle zur Gewinnung autologen Knochenmaterials genutzt werden. Zur Reinigung und Wiederaufbereitung ist sie RKI konform komplett zerlegbar und der integrierte Edelstahlfilter ist für mehrfache Verwendung geeignet.

Bone trap / Suction tube incl. filter. Already during the preparation of the implant site, the bone trap may be used to gain autologous bone material. It is completely dismountable for cleaning and maintenance. The stainless steel filter is designed for multiple use.



2561-2


Knochenfalle inkl. Filter
Bone trap incl. filter

2561-21

Filter
Filter



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

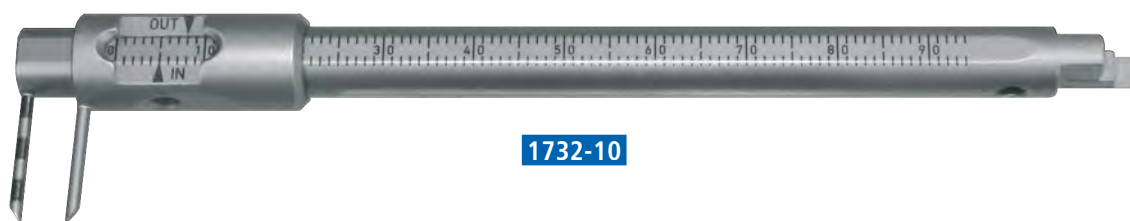

1732-10

i

Krekeler Messschieber • Krekeler caliper

Das Setzen von Implantaten wird durch den Messschieber nach Prof. Krekeler, um ein vielfaches erleichtert. Inserting Implants gets much easier and effective due the caliper acc. to Prof. Krekeler.



Funktionsweise des Krekeler Messschiebers

Durch die genau 1,5 mm dicken Messdorne kann sofort der maximale Durchmesser des Implantats bestimmt werden. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte eine Knochenwandung von mindestens 1,5 mm Dicke erhalten werden um ein Resorbieren des Knochens nach der Implantation auszuschliessen.

Während der Messung des Interdentalspalts kann am Nonius über die IN Markierung der maximal mögliche Implantatdurchmesser abgelesen werden. Eine korrekte Messung wird durch Anlegen der Messdorne unter Berührung des Zahnhalses der Nachbarzähne vorgenommen. Über die OUT Markierung ist das Gesamtmaß ablesbar.



Functionality of the Krekeler Caliper

For a maximum stability always the widest possible implant diameter should be chosen. Due to the exactly 1.5 mm measuring rods, you can read the maximum diameter directly. Due to scientific research in order to avoid bones resorbtion after the implantological treatment, there should be a wall of at least 1.5 mm of bone material to each side.

During the measurement of the interdental gap, it is possible to read directly the maximum implant diameter from the IN mark. A correct measurement is performed by applying the rods at the cervix dentis of the neighboring teeth. From the OUT mark you may read the overall measure.



1418-3

3mm / 5mm

i

Buser Knochenschaber • Buser Bone scraper

Mit dem Knochenschaber nach Buser wird ein Instrument zur Verfügung gestellt, welches über die Breiten 3 und 5mm verfügt. Damit lässt sich autologer Knochen direkt am OP – Eingriffsgebiet sammeln. Durch die speziell gehärteten Arbeitsenden ist die Schärfe des Instruments für lange Zeit gewährleistet.

With the bone scraper by Buser is an instrument provided which has working tips with the measures of 3mm and 5mm. This instrument makes it very easy to collect autologous bone directly in the area of the treatment. Specially hardened working tips ensure sharpness for a long time.



i

Flexible Sinuslift Küretten · Flexible sinus lift cures


Optimales Feingefühl beim lateralen Sinuslift.

Die versehentliche Perforation der Sinusmembran ist eine Komplikation, die häufig während der Anhebung des Sinusbodens (Sinuslift, SBE) auftritt. Das neue SCHWERT Sinuslift-Instrumentarium erhöht durch stumpfe, flexible Arbeitsenden mit „Swing-Effekt“ die Taktilität und das operative Feingefühl bei der direkten Sinusbodenelevation. Durch die spezielle Formgebung und Beschaffenheit des Edelstahls zwischen Griff und aktivem Part wird leichter Druck abgefedert und dem Operateur eine direkte Rückmeldung vermittelt. Gleichzeitig wird die Perforationsgefahr der Schneider'schen Membran auf ein Minimum reduziert.

Bereits bei der Entwicklung wurde auf eine besonders praktikable Handhabung geachtet. Durch die verschieden abgewinkelten Enden wird die Navigation auch in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Die Instrumentenlinie umfasst sechs Kürettenfiguren um der jeweiligen OP-Situation optimal gerecht zu werden. Ergänzt werden diese durch Stopfer- und Löffelinstrument zur Einbringung des Augmentats.

An optimum sensitivity during the laterally lift procedure.

The perforation of the Schneiderian membrane is a complication that often occurs during a maxillary sinus floor augmentation procedure. The new SCHWERT Sinus-Lift Instruments increase the sensitivity by blunt and flexible working tips with "Swing-Effect". Because of their special shapes and the characteristic of the stainless steel between the handle and the active part, light pressure is cushioned and gives the operator a direct and sensitive response. The risk to perforate the Schneiderian membrane is reduced to a minimum. Already during their development the focus was a practicable handling. Because of varying angulations and shapes of the active parts they are easy to navigate also in difficult areas. The line of cures consists of six different figures for every situation. Spoon and condenser complement the set to place the bone graft.

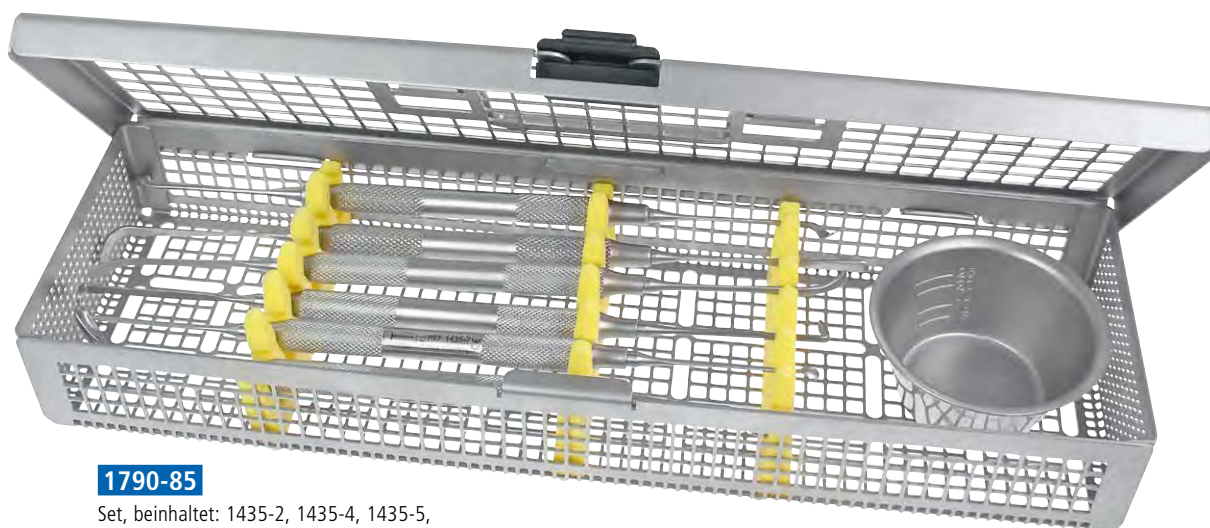

1790-85

Set, beinhaltet: 1435-2, 1435-4, 1435-5, 1435-7, 1435-8, 2616-25 Medizinbecher 25 ccm, 2605-02
Set, consisting of: 1435-2, 1435-4, 1435-5, 1435-7, 1435-8, 2616-25 Medicine cup 25 ccm, 2605-02



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA



1435-1

FIG. 1
20,4 cm



1435-2

FIG. 2
20,7 cm



1435-3

FIG. 3
20,5 cm



1435-4

FIG. 4
19,5 cm



1435-7

FIG. 5
19,0 cm



1435-8

FIG. 6
19,5 cm



1435-5

17,6 cm
Löffelinstrument
Spoon instrument



COLOR CODE




i

SCHWERT Küretten & Scaler · SCHWERT curettes & scalers

- Ergonomisch ■ Präzise ■ Scharf ■ Ergonomic ■ Precise ■ Sharp
- Farbcodiert ■ Auswechselbar ■ Color coded ■ Exchangeable



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

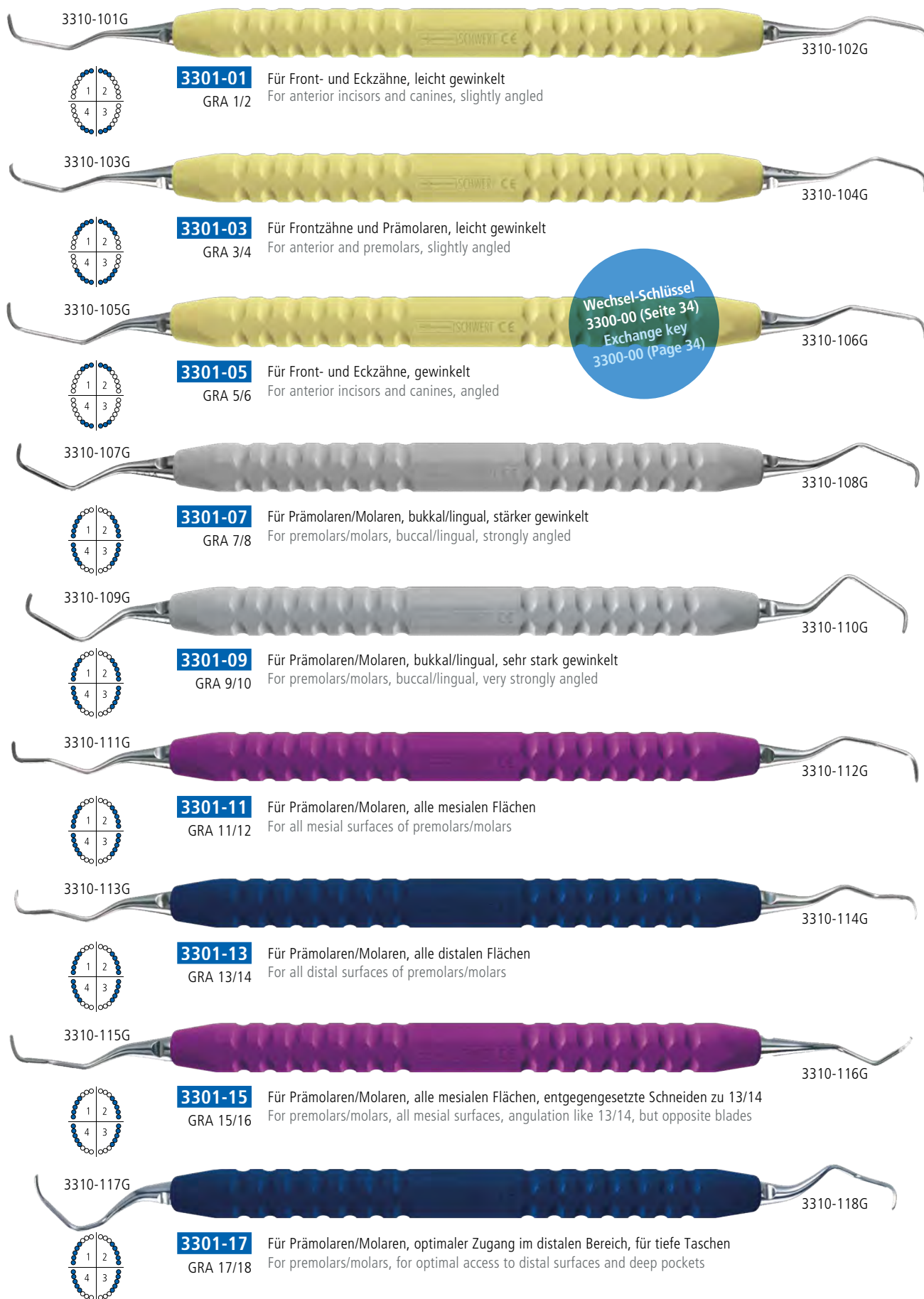

Wechsel-Schlüssel
3300-00 (Seite 34)
Exchange key
3300-00 (Page 34)




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Parodontologie · Periodontal

COLOR CODE GRACEY Küretten · GRACEY curettes

UpDate!

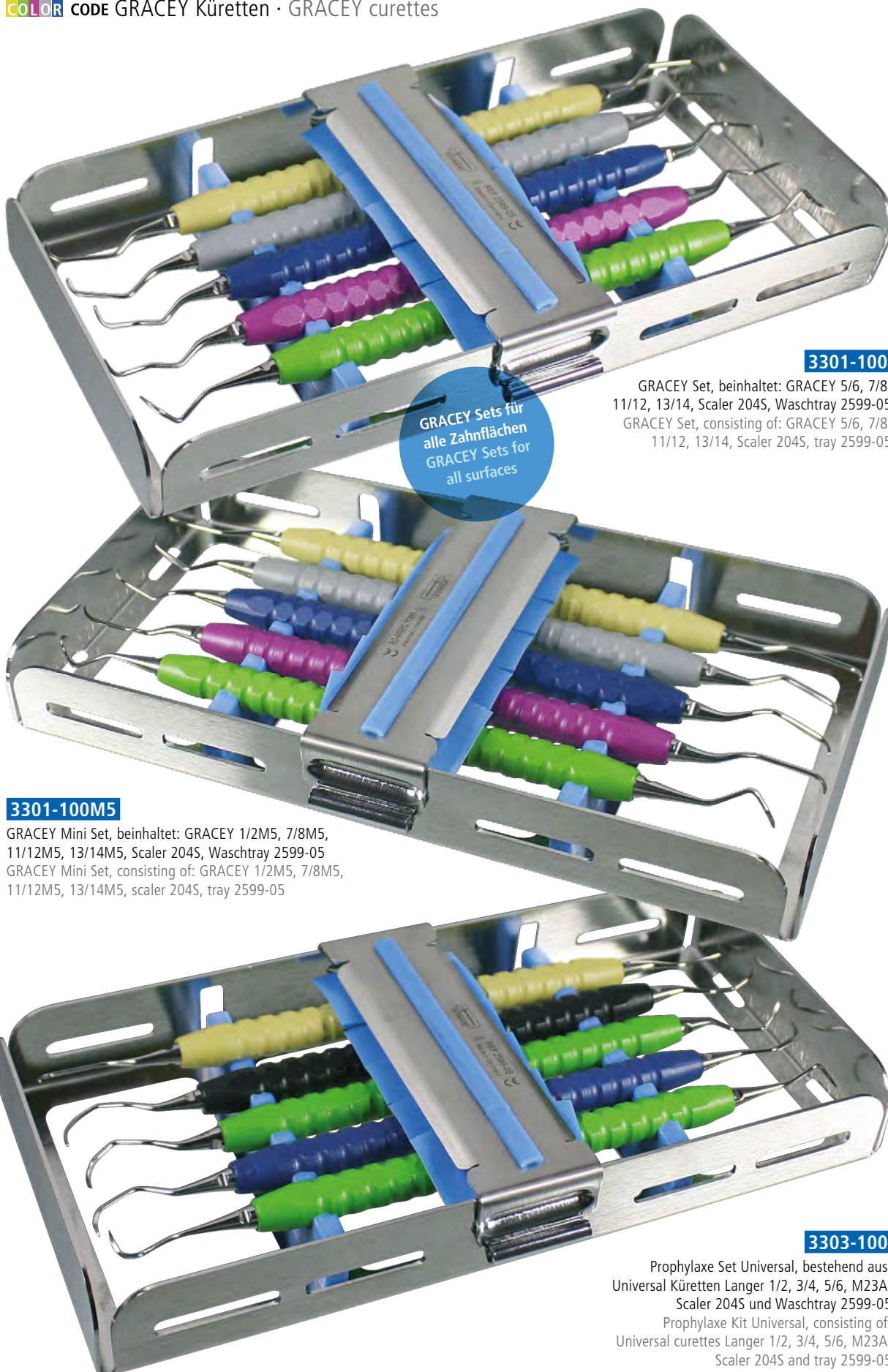

GRACEY Sets für
alle Zahnflächen
GRACEY Sets for
all surfaces

3301-100

GRACEY Set, beinhaltet: GRACEY 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Scaler 204S, Waschtray 2599-05
GRACEY Set, consisting of: GRACEY 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Scaler 204S, tray 2599-05

3301-100M5

GRACEY Mini Set, beinhaltet: GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5, Scaler 204S, Waschtray 2599-05
GRACEY Mini Set, consisting of: GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5, scaler 204S, tray 2599-05

3303-100

Prophylaxe Set Universal, bestehend aus:
Universal Küretten Langer 1/2, 3/4, 5/6, M23A, Scaler 204S und Waschtray 2599-05
Prophylaxe Kit Universal, consisting of:
Universal curettes Langer 1/2, 3/4, 5/6, M23A, Scaler 204S and tray 2599-05



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i


GRACEY Mini-Küretten · GRACEY Mini-Curettes



Die SCHWERT Mini-Graceys besitzen im Vergleich zu Standard Gracey Figures einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden



Compared to standard Gracey figures the SCHWERT Mini-Gracey have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.

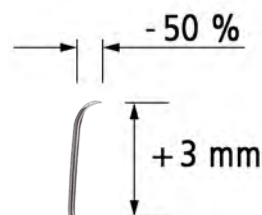

Besonders geeignet für:


- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp

NEU! Jetzt mit Titan Spitzen zur Implantat Reinigung

They are recommended for:

- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes

NEW! Now also with titanium tips for implant cleaning

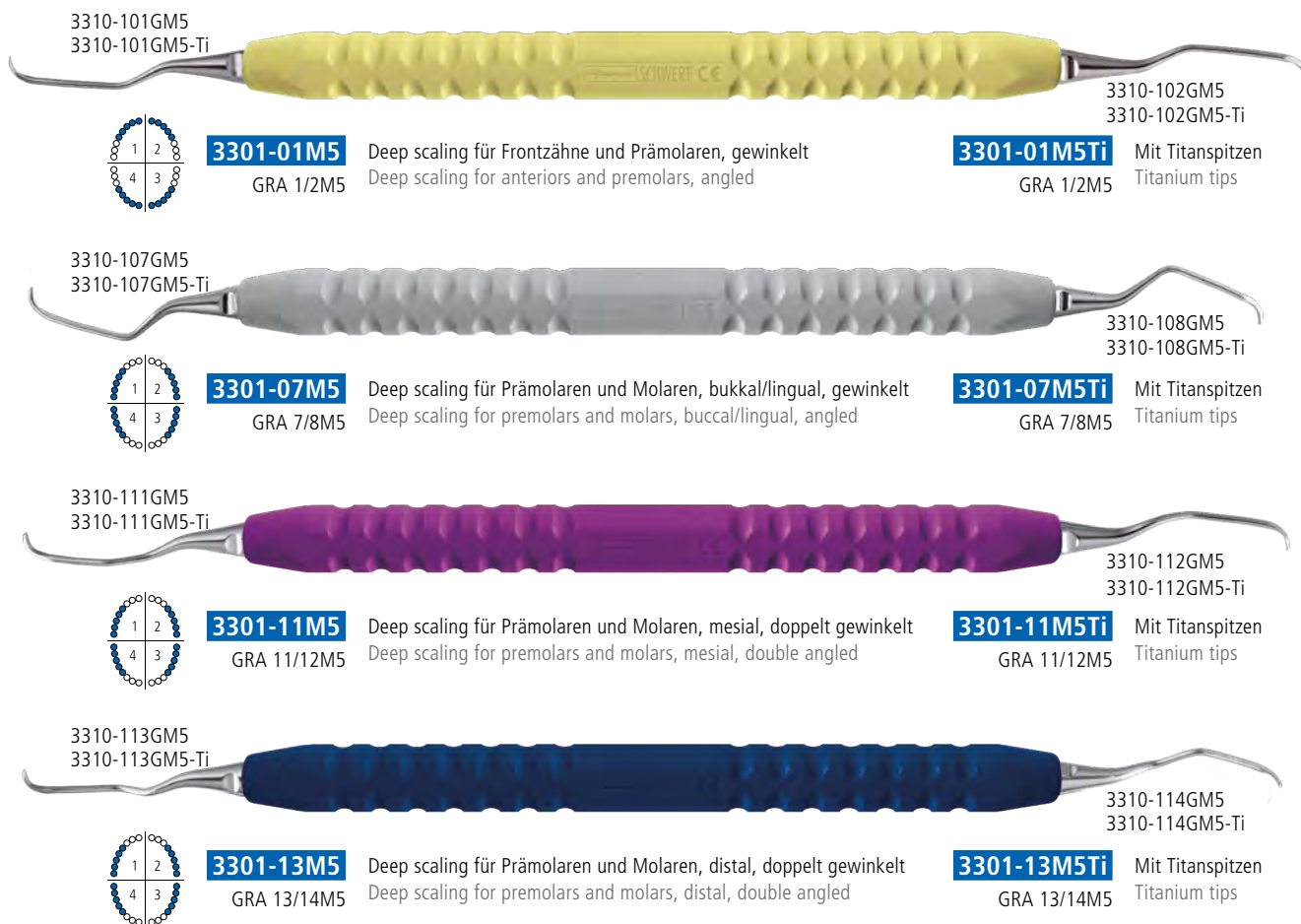




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Ti Küretten · Ti cures

Universal-Küretten zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen. **Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.**


All purpose implant cures with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks. **The titanium inserts are resharpenable.**

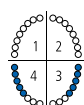

3303-01Ti

L 1/2


LANGER L 1/2, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Unterkiefer Prämolaren/Molaren
LANGER L 1/2, universal curette, titanium tips, for mandibular posterior

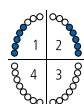

3303-03Ti

L 3/4


LANGER L 3/4, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Oberkiefer Prämolaren/Molaren
LANGER L 3/4, universal curette, titanium tips, for maxillary posterior

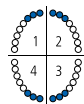

3303-05Ti

L 5/6

LANGER L 5/6, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Oberkiefer/Unterkiefer Frontzähne
LANGER L 5/6, universal curette, titanium tips, for maxillary and mandibular anterior

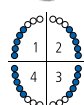

3302-04Ti

CU 4R/4L

COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, titanium tips, for maxillary and mandibular posterior




3300-00

Schlüssel zum Auswechseln der Arbeitsenden
Key to exchange working tips

i

Wechsel-Schlüssel · Exchange key

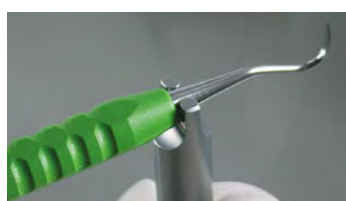


Zum auswechseln der Arbeitsenden, passend für alle **COLOR CODE** Instrumente. **Tip:** Zum Ausrichten der Spitzen empfiehlt es sich, zwei Schlüssel zu verwenden.

For exchanging the working tips, fits for all **COLOR CODE** Instruments. **Tip:** For a parallel adjustment we recommend to use two keys.



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

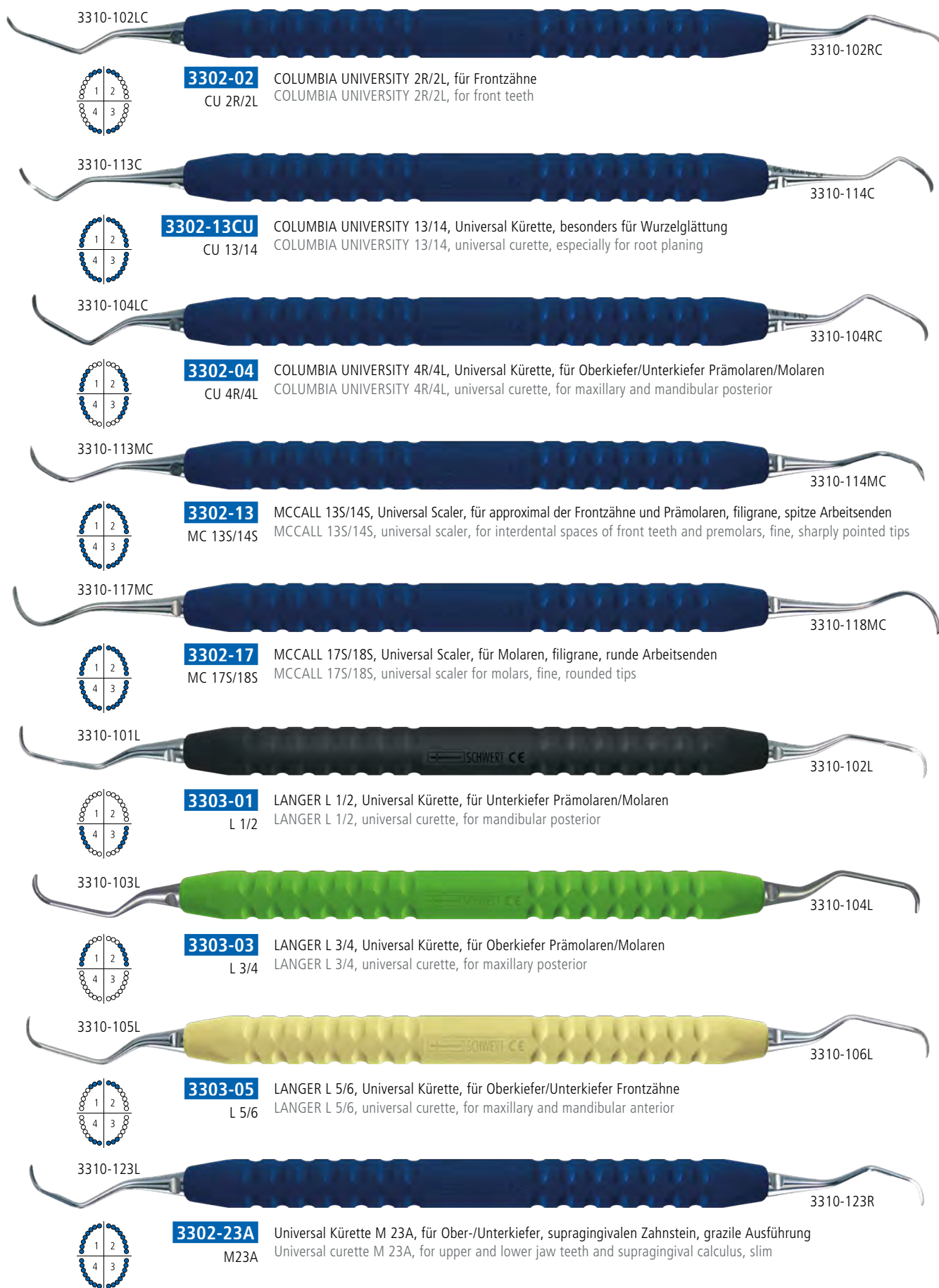




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


Parodontologie · Periodontal

COLOR CODE Scaler · Scaler


UpDate!

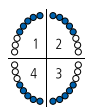


3305-06 HYGIENIST Sichel scaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial/distal
H 6/7 HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolars, mesial/distal

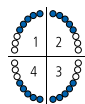


3305-533 HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, für Frontzähne und Prämolaren, speziell zur Entfernung von starkem Zahnstein
H5/33 HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, for anterior and premolars, especially for heavy calculus

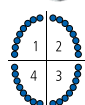


3305-02 KAPLAN Sichel scaler mit großer, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche. Zum Entfernen von starkem Zahnstein, Kunststoff-, Zement- und Klebstoffrückständen in allen Interdentalräumen
CI 2/3 KAPLAN sickle scaler with large facial surfaces matched to tooth contours for removing heavy calculus, plastic, cement, or adhesive residues from all interdental spaces

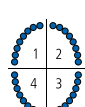


3305-35 Scaler mit kleiner, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
U135 Scaler with small facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces

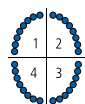


3306-02 TAYLOR mittelgroßer Sichel scaler, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
T2/3 TAYLOR medium-sized scaler with facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces

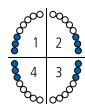


3305-04S Sichel scaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
204S Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

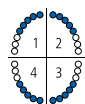

3305-04SD Sichel scaler zur Zahnsteinentfernung schmaler Interdentalräume im Bereich der Prämolaren und Frontzähne.
204SD Sickle scaler for removing dental plaque from narrow interdental spaces in the premolar and frontal area.

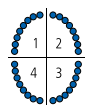

3305-23 Universal Sichel scaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume
M23 Universal sickle scaler for removing calculus from interdental spaces

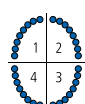

3305-GX Universal Sichelkurette (Scaler), abgerundeten Spitzen
GXC4 Universal sickle curette (scaler), rounded tips



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

i

OPTIFLEX Kunststoff PA-Sonden Einsätze • OPTIFLEX plastic PA-Probe inserts

Die Optiflex PA-Sonden Einsätze aus Kunststoff, bieten ein flexibles Arbeitsende, welches sich hervorragend der Anatomie, der Zähne, beim Messen der Taschentiefe, anpasst. Die Spitzen sind in den unterschiedlichen gängigen Graduierungen erhältlich. Die schwarzen Markierungen sind farbstabil und bieten einen sehr guten Kontrast im Vergleich zum weißen Kunststoff und dem Zahnfleisch. Dies vereinfacht die Ablesung um ein Vielfaches. Die Spitzen sind sterilisierbar und durch das M4x0,5 Gewinde in jeden beliebigen Griff, mit genanntem Gewinde, einsetzbar. Z.B. REF: 3300-02 oder 3300-31.


Nicht nur zum Feststellen des parodontalen Status sind die Einsätze geeignet, sondern auch hervorragend für die Verwendung am Implantat, da ein Verkratzen der Oberflächen ausgeschlossen ist.

Die Spitzen können verwendet werden, bis sie verbogen, ausgebleicht oder nicht mehr ablesbar sind.

Optiflex PA-Probe inserts made from plastic have a flexible working tip which adapts ideal to the anatomy of teeth, while measuring the depth of the pocket. The tips are available in the different common graduations. The black markings are color stable and offer a very good contrast in comparison to the white plastic and the gum. This simplifies the readout a lot. The tips are sterilizable and are due to their M4x0.5 thread easy insertable into any handle with mentioned thread. E.g. REF: 3300-02 or 3300-31.

Not only for determine the parodontal status are the probes suited but also are perfectly suited for the use on an implant, as it is not possible to scratch the implant's surface.

The tips can be used until they are bent, lost their color or not readable anymore.

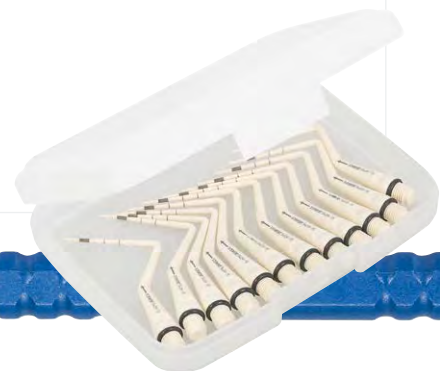

3409-1012

#1 Graduierung: 3/6/8/11 mm
VPE=12 Stk. M4x0,5 mm
#1 graduation 3/6/8/11mm,
PU 12 pieces, M4x0,5mm



3409-1112

#CPG12 Graduierung 3/6/9/12 mm
VPE=12 Stk. M4x0,5 mm
#CPG12 graduation 3/6/9/12mm,
PU 12 pieces, M4x0,5mm

3300-02

COLOR-Code Universalgriff Blau. Der Griff ist in insgesamt 6 verschiedenen Farben erhältlich.
Gewinde M4x0,5
COLOR-Code universal handle blue. Handle is available in 6 different colors. Thread M4x0.5



3409-1212

#CPNG22 Graduierung 2/4/6/8/10/12 mm
VPE=12 Stk. M4x0,5 mm
#CPNG22 graduation 2/4/6/8/10/12mm,
PU 12 pieces, M4x0,5mm



3409-1312

#PCPG 11,5 Graduierung 3,5/5,5/8,5/11,5
VPE=12 Stk. M4x0,5
#PCPG 11,5 graduation 3,5/5,5/8,5/11,5,
PU 12 pieces, M4x0,5



3409-1512

#CNC Graduierung in 1- 15 mm Schritten,
North Carolina VPE= 12 Stk. M4x0,5
#CNC graduation in 1- 15mm steps,
North Carolina, PU 12 pieces, M4x0,5




Konservierung · Restorative

UpDate!

ULTRA Komposite Set · ULTRA Composite set

ULTRA

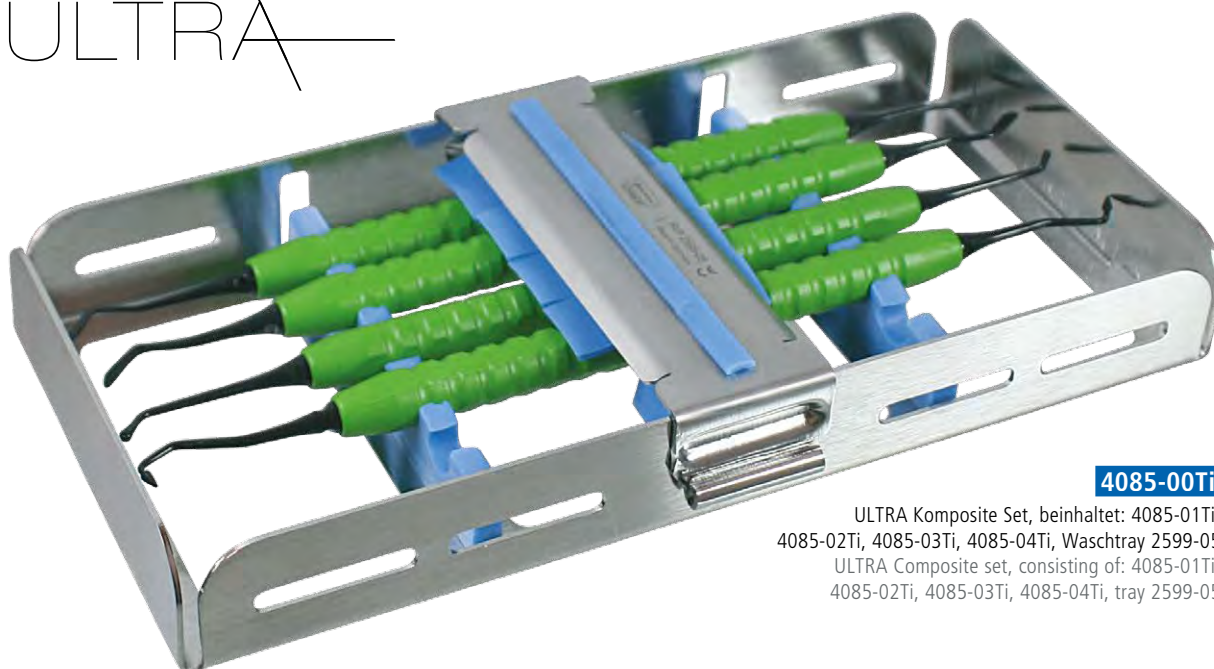

4085-00Ti

ULTRA Komposite Set, beinhaltet: 4085-01Ti, 4085-02Ti, 4085-03Ti, 4085-04Ti, Waschtray 2599-05
ULTRA Composite set, consisting of: 4085-01Ti, 4085-02Ti, 4085-03Ti, 4085-04Ti, tray 2599-05



4085-01Ti

Komposite Spatel FIG. 1, fein, 1,8 / 1,5 mm, auswechselbar
Composite spatula FIG. 1, fine, 1.8 / 1.5 mm, exchangeable

4084-111Ti



4085-02Ti

Komposite Spatel FIG. 2, groß, 2,9 / 2,7 mm, auswechselbar
Composite spatula FIG. 2, 2.9 / 2.7 mm, exchangeable

4084-112Ti



4085-03Ti

Komposite Birnenstopfer, Ø 1,5 / 2,0 mm, auswechselbar
Composite pear shape plugger, Ø 1.5 / 2.0 mm, exchangeable

4084-113Ti



4085-04Ti

Komposite Fissureninstrument, Ø 1,8 / 1,8 mm, auswechselbar, ein Ende speziell für distal anguliert
Composite occlusal former / burnisher, Ø 1.8 / 1.8 mm, exchangeable, one tip angulated especially for distal

4084-114Ti



4085-05Ti

Komposite Kugelstopfer, fein, Ø 0,9 / 1,3 mm, auswechselbar
Composite ball plugger, fine, Ø 0.9 / 1.3 mm, exchangeable

4084-115Ti

ULTRA



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA

i

ULTRA Komposite • ULTRA Composite


Die schwarze ULTRA Beschichtung ist im Vergleich zu Standardinstrumenten extrem hart und kratzbeständig. Die blendfreie und glatte Oberflächenstruktur verhindert störende Lichtreflexionen und ein Anhaften von Compositen. Die chemischen Eigenschaften der Beschichtung führen bei der Anwendung von Lösungsmitteln oder Sterilisation zu keinen unerwünschten Reaktionen.

Mit den neuen, superfeinen ULTRA Composite Spateln (4085-09Ti & 4085-10Ti) hat man sehr feine und hoch flexible Spateln entwickelt. Diese werden insbesondere geschätzt für die anspruchsvolle Arbeit in der ästhetischen Frontzahnzone.

The black ULTRA coating is extremely hard and scratch resistant compared to standard instruments. The smooth and anti glare surface avoids disturbing reflections of light and is less sticky for composite materials. The coating does not react with cleaning solutions or throughout the sterilization process, due to its chemical characteristics.

With the new super fine ULTRA composite spatulas (4085-09Ti & 4085-10Ti) we invented very fine and high flexibles spatulas. They are appreciated particularly for the challenging work in the aesthetic front teeth area.

Wechsel-Schlüssel
3300-00 (Seite 34)
Exchange key
3300-00 (Page 34)

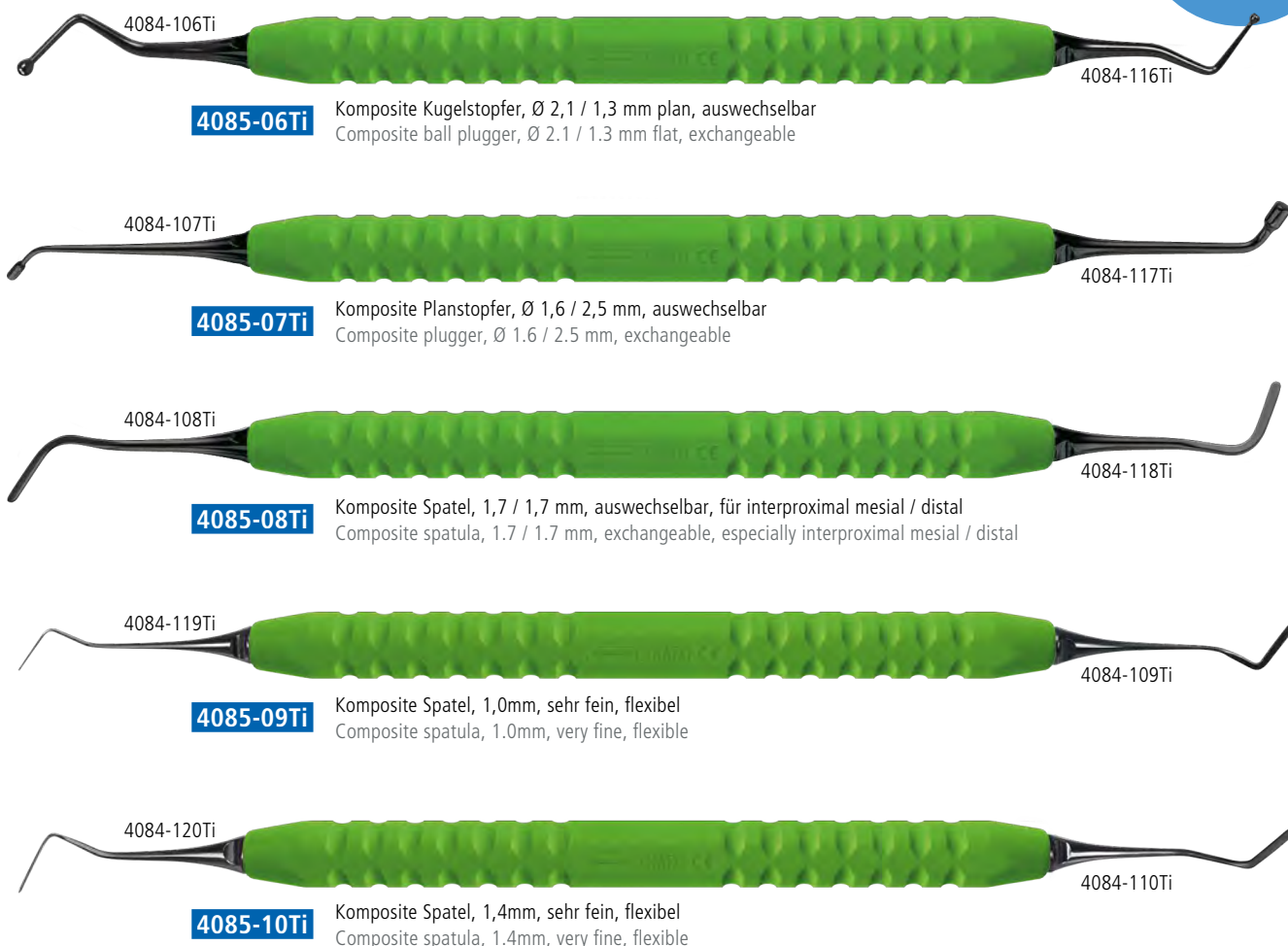



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Prothetik Schraubendreher Set · Prosthetics screwdrivers set

Die Anzahl verschiedener Implantatsysteme nimmt ständig zu und in Praxis und Labor müssen laufend Implantat-Abutments aller Art gelöst werden. Mit dem SCHWERT Prothetik Schraubendreher Set können über 90% der am Markt etablierten Verschraubungen gelöst werden.

- Die einzelnen Instrumente sind im Tray zur schnellen Identifizierung gekennzeichnet.
- Es ist jeweils eine kurze und lange Version enthalten.
- Die einzelnen Schraubendreher können über das Winkelstück betrieben, oder per Adapter und Finger- / kalibrierter Drehmomentratsche eingedreht werden.
- Die Schraubendreher sind für Drehmomente > 30 Ncm Hexagon-Spannsystem kompatibel.

The number of different Implant systems is increasing constantly and in dental practice and dental lab it is necessary to loosen implant abutments of all kinds. By using the SCHWERT Prosthetics screwdriver set it is possible to loosen more than 90% of the established screwings.

- Each instrument is marked in the tray for fast identification. The kit contains always a short and a long version.
- The screwdrivers fit in the hand piece or can be used by adapter and a finger/torque ratchet.
- The hexagonal receptacle system allows torques > 30 Ncm to be transferred.



6802-50

Einbringhilfe zur manuellen Verschraubung ohne Ratsche
Inserting assistant for manual screwing without wrench



6802-100

Prothetik Schraubendreher Set
Prosthetics screwdrivers set



Hexagon Spannsystem kompatibel für Drehmomente >30 Ncm
Hexagon chucking system compatible for torques >30 Ncm



6802-72

Drehmomentratsche: RKI-konform komplett zerlegbar zur Aufbereitung
Torque wrench: Completely dismantlable for reprocessing



Entnahmehilfe im Rack integriert
Detaching assistant included in the rack



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description	Menge Quantity
	6802-100	Schraubendreher Set: 18 Schlüssel, 1 Ratsche, 1 Eindrehhilfe/ Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers set: 18 keys, 1 ratchet, 1 inserting assistant, 1 pre-assembly key, 1 rack, 1 box	1 Set 1 Set
	6803-100	Schraubendreher Set: 18 Schlüssel, 1 Drehmomentratsche , 1 Eindrehhilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers set: 18 keys, 1 ratchet with torque , 1 inserting assistant, 1 pre-assembly key, 1 rack, 1 box	1 Set 1 Set
	6802-72	Ratsche mit Drehmoment, 10 Ncm bis 40 Ncm, mit Fixierfunktion zum Deaktivieren des Drehmoments (im Set 6803-100 enthalten) Ratchet with torque, 10 to 40 Ncm, with fixing function for deactivating the torque (included in set 6803-100)	1 Stück 1 piece
	6802-70	Ratsche mit abnehmbarem Griff / manuelle Eindrehhilfe (im Set 6802-100 enthalten) Ratchet without torque (included in set 6802-100)	1 Stück 1 piece
	6801-01	Rack für Schraubendreher Rack for screwdrivers	1 Stück 1 piece
	2608-32	Edelstahl Box gelocht 18 x 9 x 3 cm (ohne Abbildung) Stainless Steel Box perforated 18 x 9 x 3 cm (without illustration)	1 Stück 1 piece
	6802-50	Eindrehhilfe / Adapter, für alle Schlüssel Inserting assistant for screwdrivers, for all keys	1 Stück 1 piece
Schraubendreher, kurz, 21 mm · Screwdrivers, short, 21 mm			
	6802-01	Torx T6 x 21 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 21 mm, Straumann, Aesthura	1 Stück 1 piece
	6802-02	Schlitz 1,6 x 21 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 21 mm, universal flat narrow	1 Stück 1 piece
	6802-03	Schlitz 2,0 x 21 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 21 mm, universal flat wide	1 Stück 1 piece
	6802-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 21 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 21 mm, CAMLOG	1 Stück 1 piece
	6802-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6802-06	Sechskant SW 0,9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE	1 Stück 1 piece
	6802-07	Sechskant SW 1,0 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 21 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
	6802-08	Sechskant SW 1,2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6802-09	Sechskant SW 1,8 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 21 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
Schraubendreher, lang, 26 mm · Screwdrivers, long, 26 mm			
	6803-01	Torx T6 x 26 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 26 mm, Straumann, Aesthura	1 Stück 1 piece
	6803-02	Schlitz 1,6 x 26 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 26 mm, universal flat narrow	1 Stück 1 piece
	6803-03	Schlitz 2,0 x 26 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 26 mm, universal flat wide	1 Stück 1 piece
	6803-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 26 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 26 mm, CAMLOG	1 Stück 1 piece
	6803-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6803-06	Sechskant SW 0,9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE	1 Stück 1 piece
	6803-07	Sechskant SW 1,0 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 26 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
	6803-08	Sechskant SW 1,2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6803-09	Sechskant SW 1,8 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 26 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
Ergänzend zum Set · Supplementary to the set			
	2870	Implantat-Haltepinzette, Titan (nicht im Set enthalten / Seite 39) Implant holding tweezers, Titanium (not part of the set / page 39)	1 Stück 1 piece

ALLE HANDELSMARKEN SIND DAS EIGENTUM DER JEWEILIGEN FIRMEN. FÜR ABWEICHUNGEN AUFGRUND IMPLANTATSEITIGER TOLERANZEN KÖNNEN WIR KEINE GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN!
ALL TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THE RESPECTIVE COMPANIES. FOR DEVIATIONS DUE TO IMPLANT'S TOLERANCES WE CAN'T TAKE ANY GUARANTEE.



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



i

Universal Kronenabnahmezange Universal crown removal pliers

Zum Abheben von provisorischen Kronen und Brücken und Einpassen von prothetischen Arbeiten. Insbesondere für schwierige und besonders festsitzende Abnahmen geeignet.

Specially designed for easy removal and fitting of temporary crowns, cast crowns or metal cores. Especially recommended for tight and difficult removals.

- universelle ergonomische Form zur Anwendung in allen Quadranten
- sicherer Griff mit Rückholfeder
- austauschbare Kunststoffbacken und Feststellschraube zur Kraftbegrenzung vermeiden Beschädigungen der Arbeit
- Diatrac Adhäsivpulver für perfekten Grip
- universal and ergonomic shape for use in all areas
- spring handle
- exchangeable plastic tips and adjustment screw for power limitation – gentle on ceramic and resin veneered surfaces / crowns.
- Diatrac adhesive powder for a perfect grip

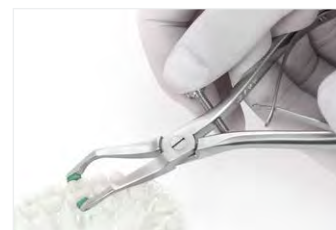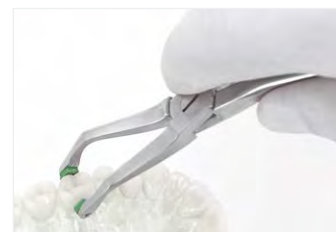


4930

Universal Kronenabnahmezange mit austauschbaren Kunststoffbacken im Set: Zange mit Feststellschraube und Rückholfeder, 20 Polymer Kunststoffbacken und 10g Diatrac Adhäsivpulver
Universal crown removal pliers with exchangeable plastic tips. Set including: Pliers with adjustment screw and retaining spring, 20 plastic-polymer tips and 10g Diatrac adhesive powder



Für komplizierte
Abnahmen
For difficult
removals

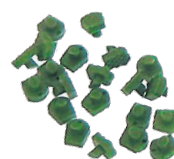

4930-13

Nachbestell Set:
10g Diatrac Adhäsivpulver,
40 Polymer Kunststoffbacken
Replacement set:
10g Diatrac adhesive powder,
40 plastic-polymer tips



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



4926

i

Kronenspreizzange · Crown spreader

Mit der SCHWERT Kronenspreizzange werden Rotationskräfte beim Spreizen der Krone zuverlässig verhindert, zum Schutz der darunter liegenden Wurzel und des Nerven.

With the SCHWERT crown spreader it is possible to spread off crowns without rotation on the root underneath, in order to protect the nerve.

1. Mit dem Kronentrenner wird die zu entfernende Krone geschlitzt.
The crown is getting slotted with a burr.



1

2. Die Zange wird je nach Anbringung des Schlitzes von okklusal, bukkal oder lingual eingesetzt. Durch Zusammendrücken der Zange, wird die Krone aufgespreizt. Insert the plier into the slit, according to its position from occlusal, buccal or lingual.



2

3. Die Spreizfunktion der Zange garantiert eine sichere und anatomisch korrekte Anwendung. Vorteil dieses Instruments: Keine Rotation an der Wurzel oder unerwünschten Druck an Nachbarzähnen.

The crown is getting spreaded securely and anatomically correct by compressing the plier. The advantages of the instrument are: there is no rotation on the root or pressure on neighbor teeth.



3



2870

16,0 cm

i

Implantathaltepinzette · Implant holding tweezers

Implantate, Abutments, Kleinteile fallen aus der Hand oder lassen sich nicht vernünftig aufnehmen? Mit der Implantathaltepinzette gehören diese Unannehmlichkeiten durch die Drei-Finger-Aufnahme der Vergangenheit an. Titan ist das Material der Wahl, um die Oberflächen der Implantate und Abutments zu schonen.

Implants, abutments and small parts fall down and it is not possible to grab them up safely? With the implant holding tweezers this unpleasant part belongs to the past, due to the three-finger-tip. Titanium is the material of choice, to prevent the surface of the implants and abutments from damages.






Endodontie • Endodontics

APICO Instrumente für retrograde Wurzelfüllungen •
APICO instruments for retrograde root fillings

UpDate!

APICO

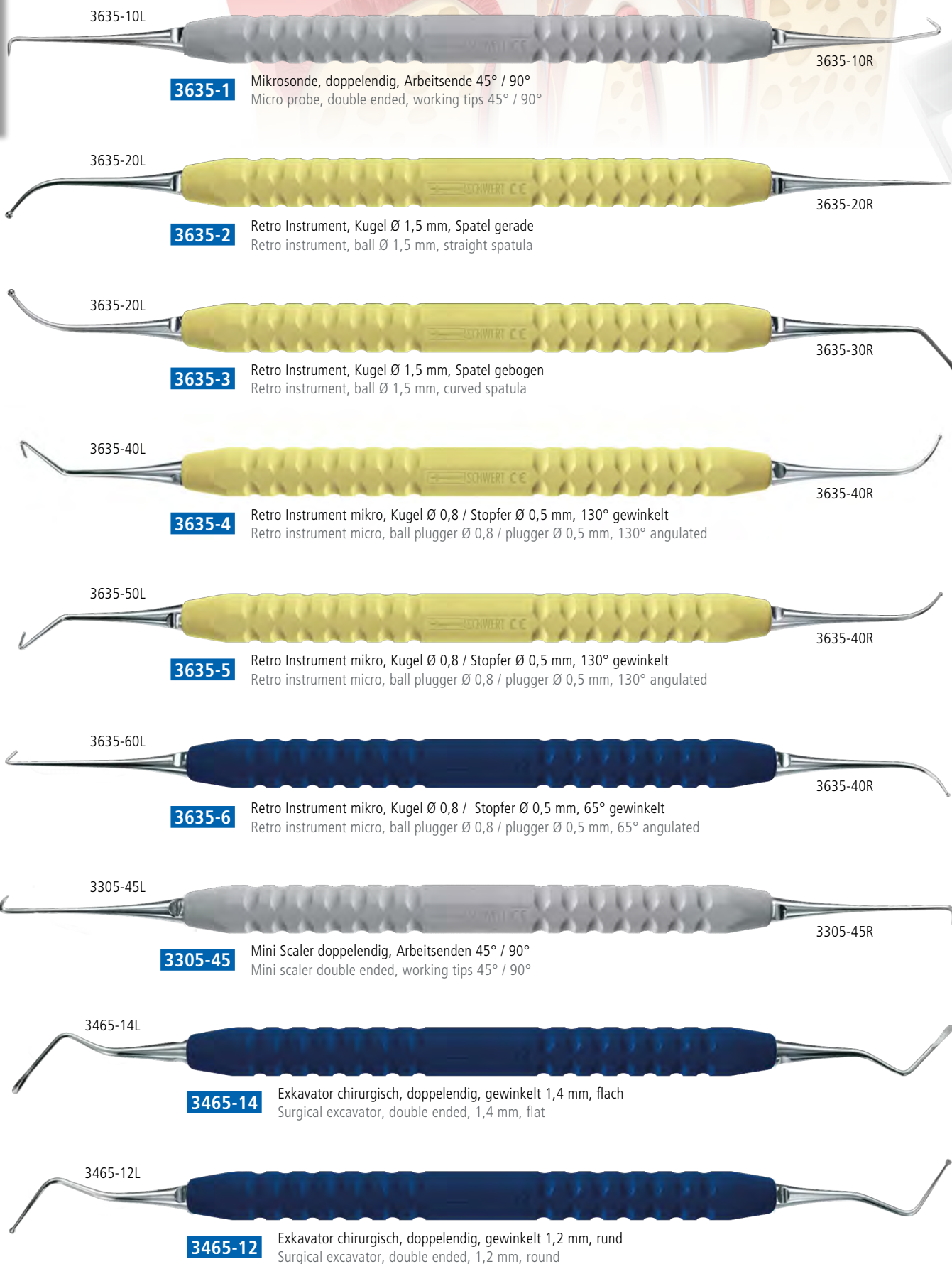

UpDate!

M.O.Re • M.O.Re

SCHWERT PROTECTOR Tray • PROTECTOR tray

2600-1

SCHWERT PROTECTOR,
1/1 mit Stegen,
270 x 175 x 40 mm
SCHWERT PROTECTOR
1/1 with racks,
270 x 175 x 40 mm



SCHWERT
SWORD • ESPADA
EPEE • SPADA



2600-11

Instrumentenauflage hoch,
260 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray,
260 mm, universal, silicone



2600-12

Instrumentenauflage hoch,
130 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray,
130 mm, universal, silicone

2600-13

Instrumentenauflage hoch,
81 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray,
81 mm, universal, silicone



2600-21

Instrumentenniederhalter,
260 mm, Silikon
Holding down clamp,
260 mm, silicone

2600-22

Instrumentenniederhalter,
130 mm, Silikon
Holding down clamp,
130 mm, silicone

2600-23

Instrumentenniederhalter,
81 mm, Silikon
Holding down clamp,
81 mm, silicone





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Index · Index

UpDate!

Numerischer Index · Numeric index

i

Alle Medizinprodukte gemäß Medizinprodukte-richtlinie 93/42/EWG sind im numerischen Index **CE** gekennzeichnet.

Alle Medizinprodukte welche neben der **CE** Kennzeichnung mit der benannten Stelle zu versehen sind, sind durch * am **CE** im numerischen Index gekennzeichnet.

Die benannte Stelle entnehmen Sie bitte unseren aktuell gültigen Zertifikaten. Diese erhalten Sie auf Anfrage oder Download unter www.schwert.com

All medical devices according to the Medical Device Directive 93/42/EEC are marked with **CE** in the numerical index.

All **CE** marked medical devices that have to be provided with the notified body are marked with * next to the **CE** mark, in the numerical index.

The notified body is available through our latest valid certificates. These are available per request or download from www.schwert.com

Artikel-Nr. Item-No.	Seite Page	
152-2	24	CE
152-7	24	CE
152-13	24	CE
152-17	24	CE
152-18	24	CE
152-22	24	CE
152-33	24	CE
152-51A	24	CE
152-64A	24	CE
152-79	24	CE
152-100	24	CE
614-30	23	CE
615-1	22	CE
615-2	22	CE
615-3	22	CE
617-01	18	CE
617-02	18	CE
617-03	18	CE
617-04	18	CE
617-05	19	CE
617-06	19	CE
617-07	20	CE
617-08	19	CE
617-09	19	CE
617-10	19	CE
617-11	19	CE
617-12	20	CE
617-13	20	CE
617-14	20	CE
617-15	20	CE
617-20	16	CE
617-100	17	CE
617-100S	17	CE
1033-50	2	CE
1033-60	2	CE
1053-10	2	CE
1053-110	2	CE
1053-11	2	CE
1053-111	2	CE
1053-112	2	CE
1053-112D	2	CE
1053-115	2	CE
1053-115C	2	CE
1053-12	2	CE
1053-12D	2	CE
1053-15	2	CE
1053-15C	2	CE
1063-10	2	CE 0482
1063-11	2	CE 0482
1063-12	2	CE 0482
1063-12D	2	CE 0482
1063-15	2	CE 0482
1063-15C	2	CE 0482

1070-00	3	CE
1070-64	3	CE 0482
1070-67	3	CE 0482
1070-69	3	CE 0482
1110-400	12	CE
1110-400B	12	CE
1110L	11	CE
1111-400	12	CE
1111-400B	12	CE
1111-400L	11	CE
1111L	11	CE
1117-400	13	CE
1117-400B	13	CE
1125-400	13	CE
1125-400B	13	CE
1133-400	12	CE
1133-400B	12	CE
1135-17	3	CE
1136-17	3	CE
1137-17	3	CE
1139-11L	11	CE
1139-400B	13	CE
1208-300	4	CE
1208-305	5	CE
1208-320	4	CE
1208-340	4	CE
1208-345	5	CE
1208-355	5	CE
1372-0	21	CE
1372-1	21	CE
1372-2	21	CE
1372-10	21	CE
1372-11	21	CE
1372-12	21	CE
1411-01	6	CE
1411-02	6	CE
1411-03	6	CE
1411-04	6	CE
1411-06	6	CE
1411-05	6	CE
1411-07	6	CE
1411-08	6	CE
1418-3	27	CE
1435-1	29	CE
1435-2	29	CE
1435-3	29	CE
1435-4	29	CE
1435-5	29	CE
1435-7	29	CE
1435-8	29	CE
1650-1	10	CE
1650-2	10	CE
1650-15	15	CE

1650-30	10	CE
1650-365	10	CE
1650-40	10	CE
1651-1	10	CE
1651-2	10	CE
1705-2	8	CE
1705-3	8	CE
1705-4	8	CE
1705-15	8	CE
1705-25	8	CE
1705-35	8	CE
1705-55	9	CE
1705-65	9	CE
1705-75	9	CE
1705-110	8	CE
1705-112	8	CE
1705-210	8	CE
1705-211	8	CE
1705-310	8	CE
1705-311	8	CE
1705-510	9	CE
1705-511	9	CE
1705-610	9	CE
1705-611	9	CE
1705-710	9	CE
1705-711	9	CE
1706-1	16	CE
1706-2	16	CE
1706-3	16	CE
1710-00	25	CE
1710-22	25	CE
1710-28	25	CE
1710-34	25	CE
1710-40	25	CE
1710-122	25	CE
1710-128	25	CE
1710-134	25	CE
1710-140	25	CE
1722	26	CE
1722-01	26	CE
1722-02	26	CE
1732-10	27	CE
1790-85	28	CE
1790-100	48	CE
1790-130	9	CE
1933-1	15	CE
1935	14	CE
2000-10	7	CE
2000-16	7	CE
2000-60	7	CE
2000-66	7	CE
2513	14	CE
2514	14	CE



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

2559-1	15	CE
2559-2	15	CE
2561-2	26	CE
2561-21	26	CE
2562-1	15	CE
2562-2	15	CE
2564-15	15	CE
2564-30	15	CE
2564-50	15	CE
2599-10	17	CE
2600-1	45	CE
2610-1	45	CE
2600-11	45	CE
2600-12	45	CE
2600-13	45	CE
2600-21	45	CE
2600-22	45	CE
2600-23	45	CE
2608-32	41	CE
2870	43, 41	CE
3300-00	34	CE
3300-02	37	CE
3301-01	31	CE
3301-03	31	CE
3301-05	31	CE
3301-07	31	CE
3301-09	31	CE
3301-11	31	CE
3301-13	31	CE
3301-15	31	CE
3301-17	31	CE
3301-01M5	33	CE
3301-01M5Ti	33	CE
3301-07M5	33	CE
3301-07M5Ti	33	CE
3301-100	32	CE
3301-100M5	32	CE
3301-11M5	33	CE
3301-11M5Ti	33	CE
3301-13M5	33	CE
3301-13M5Ti	33	CE
3302-02	35	CE
3302-04	35	CE
3302-13	35	CE
3302-13CU	35	CE
3302-17	35	CE
3302-04Ti	34	CE
3302-23A	35	CE
3303-01	35	CE
3303-03	35	CE
3303-05	35	CE
3303-01Ti	34	CE
3303-03Ti	34	CE
3303-05Ti	34	CE
3303-100	32	CE
3305-02	36	CE
3305-06	36	CE
3305-23	36	CE
3305-35	36	CE
3305-45	44	CE
3305-45L	44	CE
3305-45R	44	CE
3305-04S	36	CE
3305-04SD	36	CE
3305-GX	36	CE
3305-533	36	CE
3306-02	36	CE
3310-101G	31	CE
3310-101GM5	33	CE
3310-101GM5-Ti	33	CE
3310-101L	35	CE
3310-101L-Ti	34	CE
3310-102CI	36	CE
3310-102G	31	CE
3310-102GM5	33	CE
3310-102GM5-Ti	33	CE
3310-102L	35	CE

3310-102LC	35	CE
3310-102L-Ti	34	CE
3310-102RC	35	CE
3310-102TA	36	CE
3310-103	36	CE
3310-103G	31	CE
3310-103L	35	CE
3310-103L-Ti	34	CE
3310-103TA	36	CE
3310-104G	31	CE
3310-104L	35	CE
3310-104LC	35	CE
3310-104L-Ti	34	CE
3310-104RC	35	CE
3310-104XL	36	CE
3310-104XR	36	CE
3310-105G	31	CE
3310-105H	36	CE
3310-105L	35	CE
3310-105L-Ti	34	CE
3310-106G	31	CE
3310-106H	36	CE
3310-106L	35	CE
3310-106L-Ti	34	CE
3310-107G	31	CE
3310-107GM5	33	CE
3310-107GM5-Ti	33	CE
3310-107H	36	CE
3310-108G	31	CE
3310-108GM5	33	CE
3310-108GM5-Ti	33	CE
3310-109G	31	CE
3310-110G	31	CE
3310-111G	31	CE
3310-111GM5	33	CE
3310-111GM5-Ti	33	CE
3310-112G	31	CE
3310-112GM5	33	CE
3310-112GM5-Ti	33	CE
3310-113C	35	CE
3310-113G	31	CE
3310-113GM5	33	CE
3310-113GM5-Ti	33	CE
3310-113MC	35	CE
3310-114C	35	CE
3310-114G	31	CE
3310-114GM5	33	CE
3310-114GM5-Ti	33	CE
3310-114MC	35	CE
3310-115G	31	CE
3310-116G	31	CE
3310-117G	31	CE
3310-117MC	35	CE
3310-118G	31	CE
3310-118MC	35	CE
3310-123AL	36	CE
3310-123AR	36	CE
3310-123L	35	CE
3310-123L-Ti	34	CE
3310-123R	35	CE
3310-123R-Ti	34	CE
3310-133J	36	CE
3310-135UL	36	CE
3310-135UR	36	CE
3310-204L	36	CE
3310-204LD	36	CE
3310-204R	36	CE
3310-204RD	36	CE
3409-1012	37	CE
3409-1112	37	CE
3409-1212	37	CE
3409-1312	37	CE
3409-1512	37	CE
3465-12	44	CE
3465-12L	44	CE
3465-12R	44	CE
3465-14	44	CE


3465-14L	44	CE
3465-14R	44	CE
3635-1	44	CE
3635-2	44	CE
3635-3	44	CE
3635-4	44	CE
3635-5	44	CE
3635-6	44	CE
3635-10L	44	CE
3635-10R	44	CE
3635-20L	44	CE
3635-20R	44	CE
3635-30R	44	CE
3635-40L	44	CE
3635-40R	44	CE
3635-50L	44	CE
3635-60L	44	CE
4084-101Ti	38	CE
4084-102Ti	38	CE
4084-103Ti	38	CE
4084-104Ti	38	CE
4084-105Ti	38	CE
4084-106Ti	39	CE
4084-107Ti	39	CE
4084-108Ti	39	CE
4084-109Ti	39	CE
4084-110Ti	39	CE
4084-111Ti	38	CE
4084-112Ti	38	CE
4084-113Ti	38	CE
4084-114Ti	38	CE
4084-115Ti	38	CE
4084-116Ti	39	CE
4084-117Ti	39	CE
4084-118Ti	39	CE
4084-119Ti	39	CE
4084-120Ti	39	CE
4085-00Ti	38	CE
4085-01Ti	38	CE
4085-02Ti	38	CE
4085-03Ti	38	CE
4085-04Ti	38	CE
4085-05Ti	38	CE
4085-06Ti	39	CE
4085-07Ti	39	CE
4085-08Ti	39	CE
4085-09Ti	39	CE
4085-10Ti	39	CE
4926	43	CE
4930	42	CE
4930-13	42	CE
6801-01	41	CE
6802-01	41	CE
6802-02	41	CE
6802-03	41	CE
6802-04	41	CE
6802-05	41	CE
6802-06	41	CE
6802-07	41	CE
6802-08	41	CE
6802-09	41	CE
6802-50	40, 41	CE
6802-70	41	CE
6802-72	40, 41	CE1253
6802-100	40, 41	CE
6803-01	41	CE
6803-02	41	CE
6803-03	41	CE
6803-04	41	CE
6803-05	41	CE
6803-06	41	CE
6803-07	41	CE
6803-08	41	CE
6803-09	41	CE
6803-100	41	CE



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

UpDate!

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

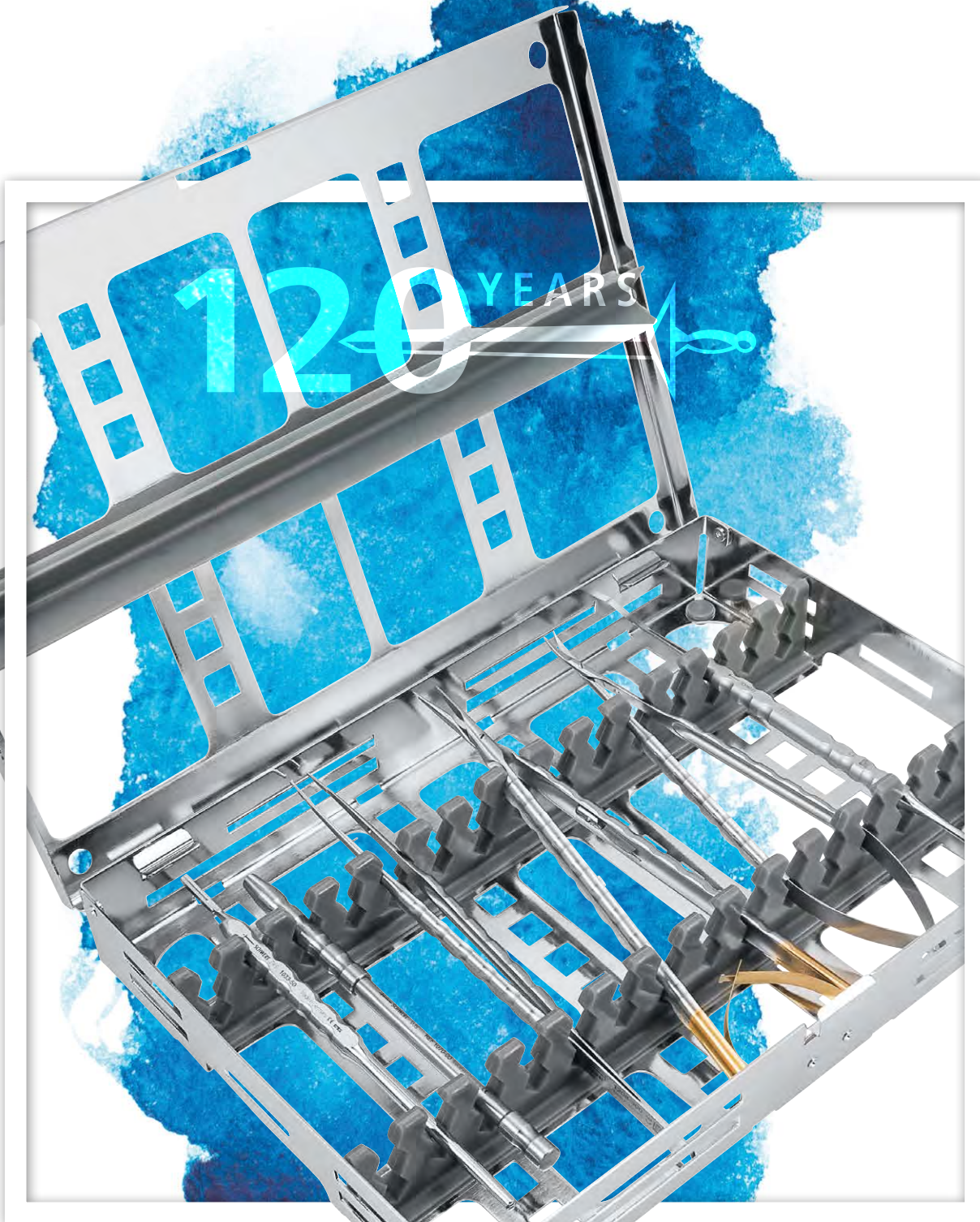

1790-100

MIKROCHIRURGIE KIT

bestehend aus:

1033-50, 1070-00, 1411-01,
1208-300, 2000-60, 1135-17

MICRO SURGICAL KIT

consisting of:

1033-50, 1070-00, 1411-01,
1208-300, 2000-60, 1135-17

